

Chirurgisches Protokoll für copaSKY Ø 3.0

Chirurgisches Protokoll für ^{copa}SKY



Implantatlänge

8, 10, 12, 14 mm

Crestalbohrer

300 U/min.

REF COPACD30

3.0

Harter Knochen D1

300 U/min.

3.0

Mittelharter /
weicher
Knochen D2-D4

300 U/min.

3.0

Pilotbohrer

Twistdrill

REF SKY-DP06

REF SKY-DP08

REF SKYDT23K

REF SKYDT23L

800 - 1.000 U/min.

Implantatlänge

8, 10
12, 14 mm

5,2, 8, 10
12, 14 mm

5,2, 8, 10
12, 14 mm

5,2
8 mm

5,2
8 mm

Crestalbohrer

300 U/min.

REF SKYCD35n

REF SKYCD40

REF SKYCD45

REF SKYCD55

REF COPACD60

3.5 N

4.0

4.5

5.0

6.0

Harter Knochen D1

Pilotbohrer

Twistdrill

300 U/min.

3.5 N

4.0

4.5

5.0

6.0

Mittelharter /
weicher
Knochen D2-D4

300 U/min.

3.5 N

4.0

4.5

5.0

6.0



Pilotbohrer

Twistdrill

800 - 1.000 U/min.


REF SKY-DP06

REF SKY-DP08




REF SKYDT23K

REF SKYDT23L

300 U/min.

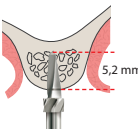

Hinweis:
Bohrtiefe bei den kurzen
copaSKY Implantaten
maximal bis zur Laser-
markierung.

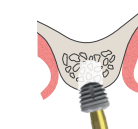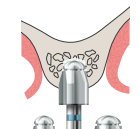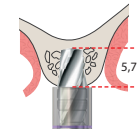

Achtung!
Die Implantatnase kann
leicht von der Kavitätenachse
abweichen.



bredent
medical

bredent
group

bredent
medical

bredent
group



Chirurgisches Protokoll für *narrow* SKY *blue* SKY *classic* SKY *white* SKY

- optimiertes knochenqualitätsorientiertes Instrumentarium und chirurgisches Protokoll für die optimale Primärstabilität
- Bohrer mit abnehmbaren Bohrerstopps
- Reduzierung der Bohrerzahl erhöht die Übersichtlichkeit und Sicherheit während der OP



Implantatlänge

8, 10, 12, 14, 16 mm

Crestalbohrer



300 U/min.

Harter Knochen D1

300 U/min.

Mittelharter / weicher Knochen D2-D4

300 U/min.

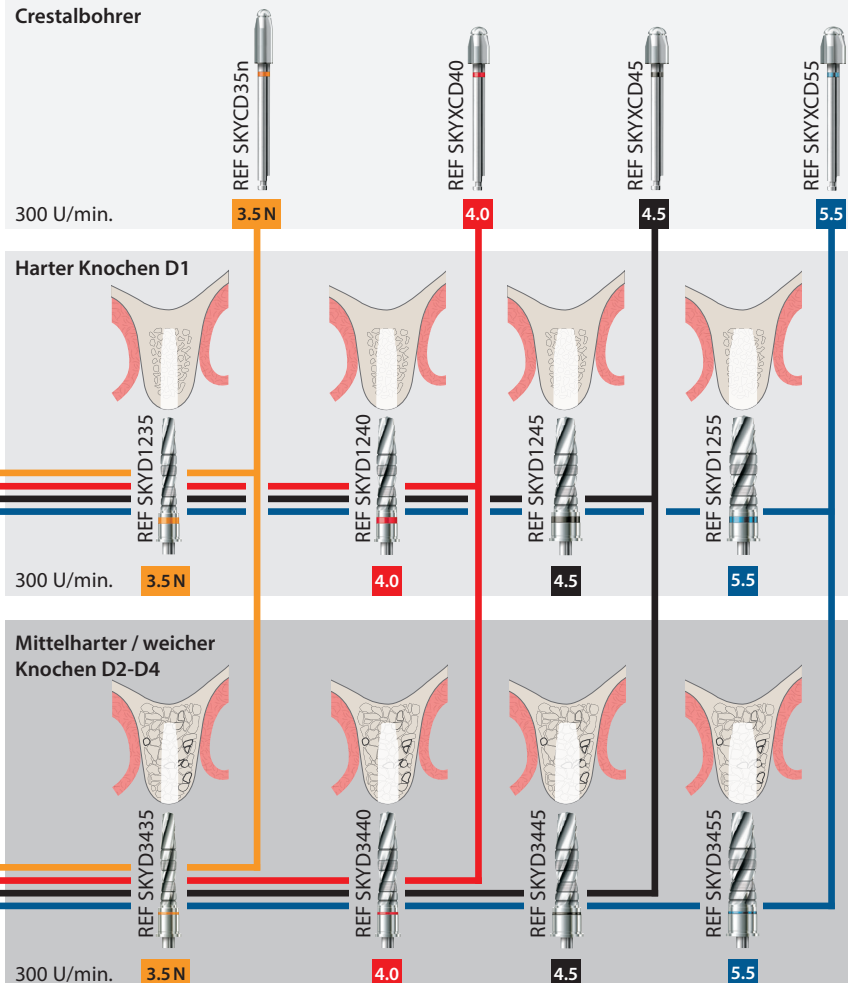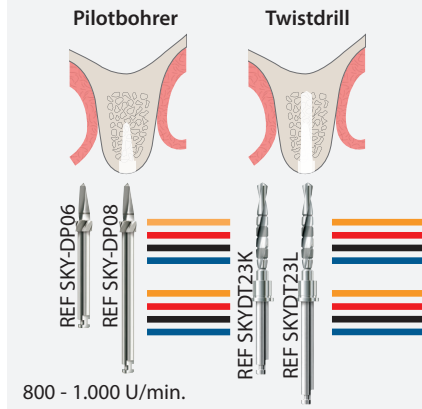


Bei den SKY classic Implantaten mit dem Durchmesser 3.5 wird der Crestalbohrer nur bis zur Lasermarkierung versenkt.


Bei den Implantaten

- narrowSKY
- blueSKY 4.0 bis 5.5
- SKY classic 4.0 bis 4.5

wird der Crestalbohrer komplett versenkt.

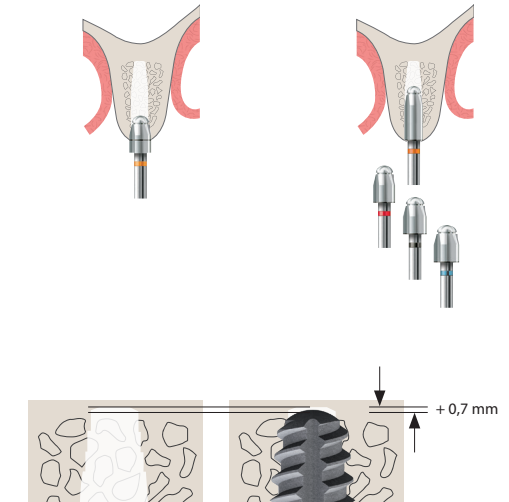

Abnehmbare Bohrerstopps

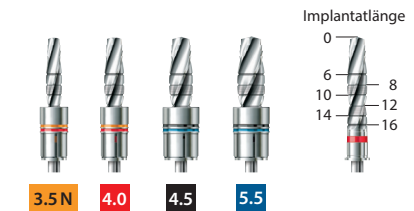

bredent
medical

bredent
dental