


Nuove soluzioni!



**Nuovi
componenti
protesici!**

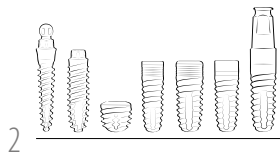

L'implanto Ultra-Short


Il nuovo impianto copaSKY è stato appositamente creato per la riabilitazione di creste alveolari con dimensione verticale ridotta.

In molti casi, grazie all'utilizzo di questo impianto ultra-short, è possibile evitare di dover eseguire complessi interventi chirurgici di innesto osseo. Il tessuto osseo preesistente viene ottimamente sfruttato grazie al design dell'implanto e al protocollo chirurgico orientato alla qualità del tessuto osseo, permettendo di ottenere un'elevata stabilità primaria e una completa osteointegrazione.

Ciò permette un trattamento atraumatico per i pazienti e di ridurre il numero di sedute in studio. La conveniente confezione con il kit completo favorisce l'acquisizione di nuovi pazienti ed accresce il successo del Vostro studio.



Superficie Osseo-connect (ocs®): il design delle superfici favorisce una migliore osteointegrazione

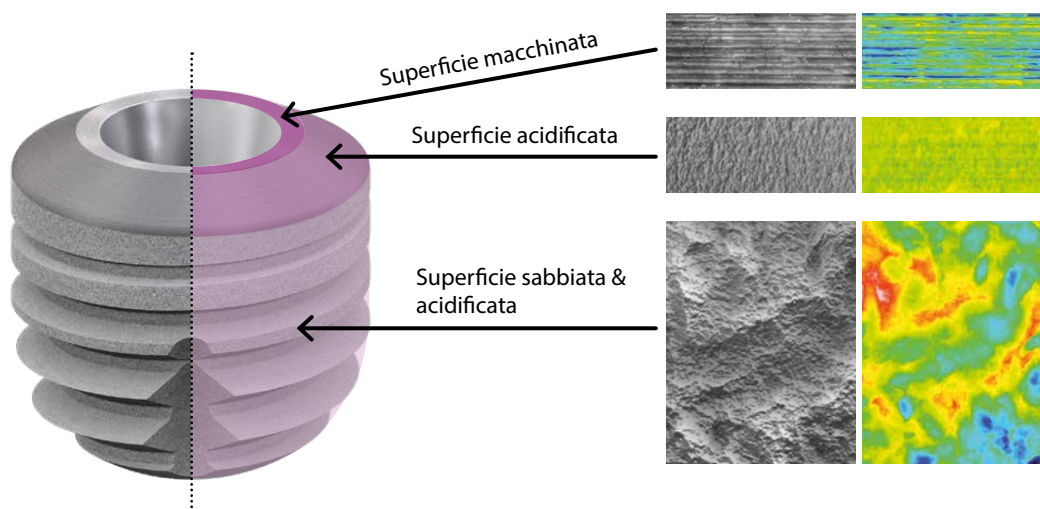


Il nuovo impianto – con un affermato DNA

Nel 2003 è stato presentato il primo impianto SKY nel mercato dentale e da allora è stato sottoposto ad una costante evoluzione.


In modo simile ad un'evoluzione biologica, le caratteristiche della struttura dell'impianto sono state costantemente migliorate e trasmesse alle successive versioni del sistema.

copaSKY possiede lo stesso codice genetico nel design dell'affermato impianto blueSKY, che ha riscosso un elevato successo nelle riabilitazioni a carico immediato.

Design implantare e caratteristiche della filettatura per un aumento della stabilità primaria

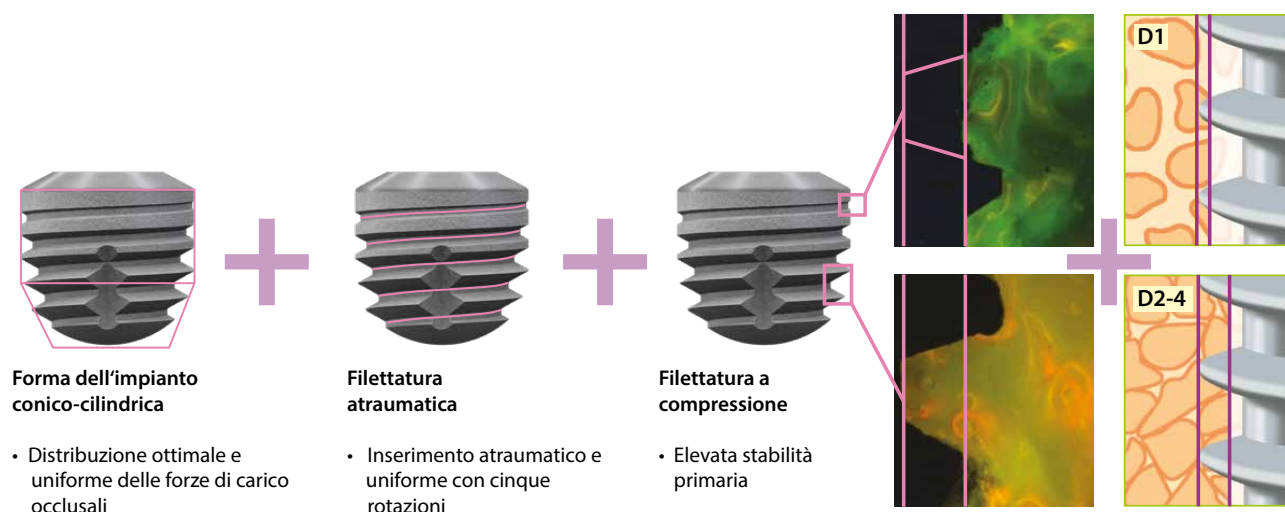


Geometria del torx di connessione

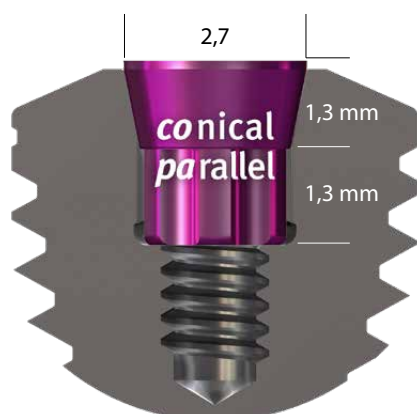

I vantaggi della connessione conico-parallela

- Un'unica geometria del torx di connessione per tutti i diametri degli impianti riduce il numero di componenti protesici, facilitando il magazzino e aumentando la sicurezza nelle procedure.
- Il Torx come il goldstandard dei dispositivi antirotazionali.
- Connessione impianto-abutment stabile e reversibile che permette una facile rimozione dei componenti protesici.

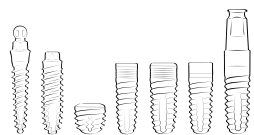

Indicazioni

I pazienti che presentano una ridotta porzione ossea necessitano di soluzioni speciali, per poter godere dei vantaggi di una riabilitazione a supporto implantare sicura e a lungo termine. Le tradizionali tecniche ricostruttive, per mezzo di innesti ossei o di sollevamento del seno mascellare, comportano in questi casi un aumento degli interventi chirurgici e di conseguenza anche dei costi del trattamento. I pazienti ansiosi che temono i rischi di simili interventi, spesso non accettano questo tipo di trattamento.

Con copaSKY si raggiunge l'obiettivo:

- nessun complesso intervento chirurgico di innesto osseo - riduzione dei rischi
- riduzione dei traumi e di una lunga e difficile fase di guarigione
- minor numero di sedute in studio
- veloce ripristino della funzione e dell'estetica
- costi contenuti

= pazienti soddisfatti
= acquisizione di nuovi pazienti
= maggior successo per lo studio odontoiatrico



Foto: Prof. Dr. Emanuel Bratu, Università di Timisoara, RO

Cosa dicono i professionisti dell'impianto copaSKY



Prof. ac. Andrea Borgonovo
Prof. ac. Università degli Studi di Milano

Il nuovo impianto copaSKY presenta un'eccezionale stabilità primaria in ogni tipo di densità ossea. La connessione impianto-abutment è precisa, stabile, forte e in grado di accogliere le forze masticatorie e le tensioni. In osso compatto è consigliato il posizionamento subcrestale.



Prof. ac. Pierangelo Oliveri
Specialista in odontostomatologia, perfezionato in parodontologia, implantologia e microscopia operatoria
Prof. ac. Clodp Università di Genova


Le atrofie verticali sono state e sono una difficoltà chirurgica non ancora risolta completamente, per cui il posizionamento di impianti standard in queste situazioni anatomiche riveste ancora qualche difficoltà. L'utilizzo degli impianti copaSKY con un'altezza di 5,2 mm può quindi essere una valida alternativa chirurgica a terapie ricostruttive più complesse.

Soluzioni protesiche – i nostri consigli


In qualità di specialisti nelle soluzioni protesiche a supporto implantare e nello sviluppo di resine ad elevate prestazioni offriamo protocolli terapeutici innovativi, mirati alla protezione dei tessuti molli e che garantiscono ai Vostri pazienti risultati il più possibile simili a quelli dei denti naturali – sia che si tratti di protesi fisse che rimovibili – ottenendo un risultato estetico d'elevata qualità.

Per la „terapia One-Time“ viene utilizzato l'affermato abutment BioHPP copaSKY elegance, che al termine della fase di guarigione viene inserito al momento della riapertura, e che, sia durante la riabilitazione provvisoria che in quella definitiva, non viene più sostituito permettendo di non traumatizzare i tessuti gengivali. Il polimero fisiologico ad elevate prestazioni BioHPP utilizzato con l'abutment BioHPP copaSKY elegance, grazie alle sue caratteristiche simili a quelle del tessuto osseo naturale, funge da „stressbreaker“, poichè confrontando i valori d'elasticità, il BioHPP è l'unico materiale che presenta valori paragonabili a quelli del tessuto osseo.

L'abutment BioHPP copaSKY elegance garantisce un successo a lungo termine.

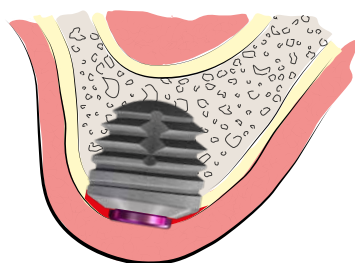

1. Guarigione sommersa +
deposito di sostanza ossea

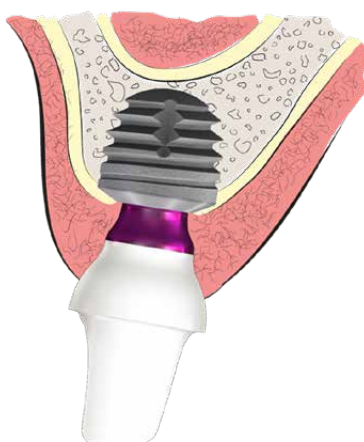

2. Inserimento dell'abutment
BioHPP copaSKY elegance +
individualizzazione



3. Fissaggio della corona




Dr. Ermanno Davide Perin
*Specialista in implantologia
dentale a carico immediato
e rigenerativa ossea guidata
Montebelluna (TV)*

Copa SKY è un'ottima alternativa per riabilitazioni implantoprotesiche, in tutti quei casi dove c'è poco osso. Nei casi trattati ho potuto constatare un'eccellente stabilità primaria, un'ottima osteointegrazione e una buona guarigione dei tessuti gengivali perimplantari.




PD Dr. Jörg Neugebauer
*Studio odontoiatrico,
Landsberg am Lech*

Gli impianti short e ultra-short si sono affermati come valida alternativa ai complessi interventi di innesto osseo ed offrono nuove soluzioni per il trattamento dei pazienti che presentano una ridotta porzione ossea. L'impianto copaSKY mi ha particolarmente convinto per la sua elevata stabilità primaria.

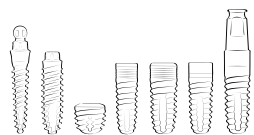


Altre soluzioni protesiche

Soluzioni che permettono di risparmiare tempo grazie a protocolli ottimizzati – con differenti versioni di abutment e materiali innovativi per ponti e corone come breCAM.HIPC e BioHPP, ideali per tutti i tipi di abutment. Per il rivestimento dei crown-abutment si consiglia di utilizzare il sistema visio.lign.

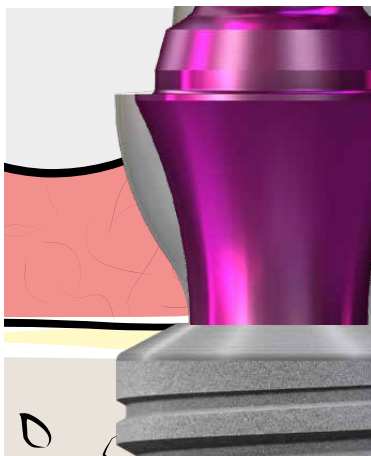


Il design, dalla forma concava e slanciata, dei componenti protesici copaSKY offre maggiore spazio ai tessuti molli rispetto agli abutment con profilo d'emergenza, soprattutto nel caso di edentulie molto strette.

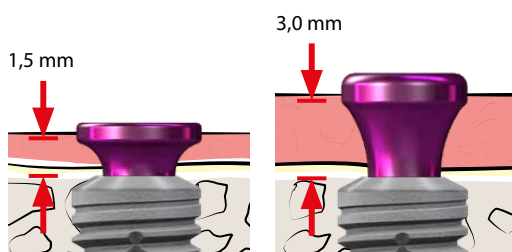

Grazie alle due altezze gengivali di 1,5 mm e di 3 mm è possibile realizzare soluzioni protesiche di elevato valore estetico per ogni biotipo gengivale.

Il design alto è ottimamente indicato quando l'impianto ha un posizionamento subcrestale.

Panoramica dei componenti protesici copaSKY

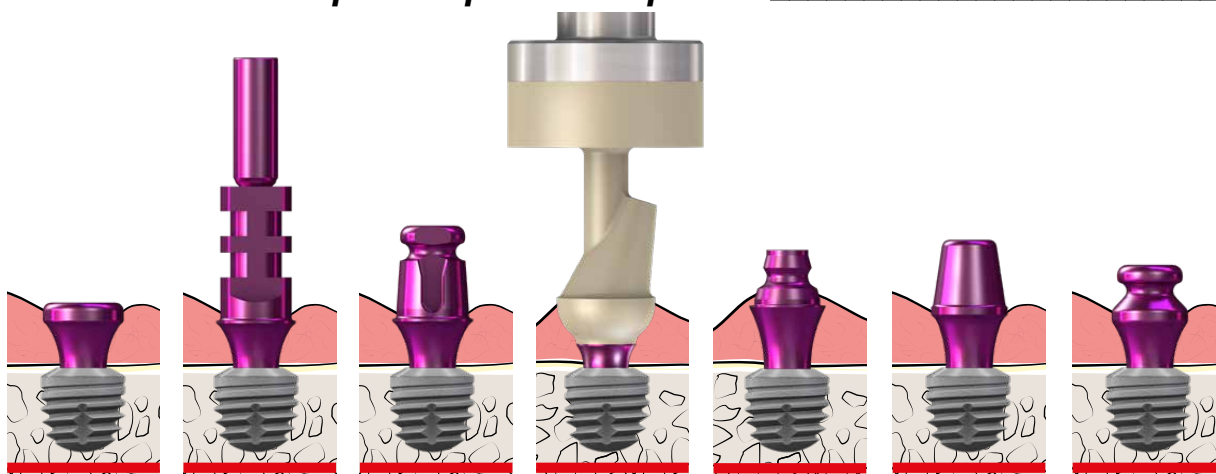


Abutment BioHPP copaSKY elegance

Gli abutment BioHPP SKY elegance completano da molti anni l'offerta dei componenti protesici per gli impianti SKY. Anche l'abutment copaSKY elegance si contraddistingue per la sua versatilità, consentendo di attuare in studio protocolli ottimizzati che prevedono trattamenti mininvasivi e più veloci per i pazienti. Le proprietà del materiale e le tecniche costruttive degli abutment SKY elegance sono state documentate in molti studi scientifici.



La superficie degli impianti ultra-short corrisponde a quella degli impianti blueSKY con diametro di 4.0 mm e una lunghezza di 8 mm.

Per favorire il successo a lungo termine degli impianti, si consiglia, di utilizzare l'abutment BioHPP copaSKY elegance come „stressbreaker“ per la riabilitazione protesica. Il materiale BioHPP, rinforzato con microparticelle ceramiche, riduce i valori massimi delle forze di carico sull'impianto, proteggendolo in tal modo a lungo termine.

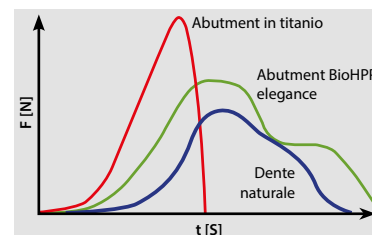

Grazie al materiale BioHPP i valori massimi delle forze di carico sull'impianto vengono ridotti.





Analisi istologica degli abutment SKY elegance in BioHPP. Dettaglio del deposito di tessuti connettivi dopo 8 settimane.

José E. Maté Sánchez de Val, Carlos Pérez Albacete Martínez, Sergio Gehrke, María P Ramírez Fernández, Vicente G. Vicent, Gerardo Gómez Moreno, José L Calvo Guirado. Periimplant tissues behavior around non-titanium material: Experimental study in dogs (Comportamento dei tessuti perimplantari su un materiale diverso dal titanio: studio sperimentale su cani)

Per realizzare i restauri sono disponibili le seguenti versioni:


- abutment preconfezionati, che possono essere facilmente individualizzati
- abutment individuali realizzati manualmente con la tecnica di pressofusione for2press
- realizzazione con tecnologia CAD/CAM, utilizzando copaSKY elegance BioHPP prefab

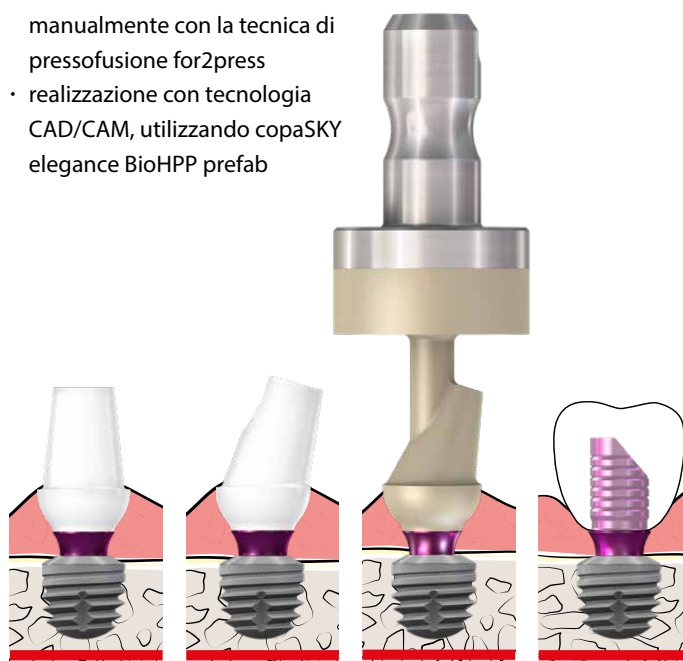

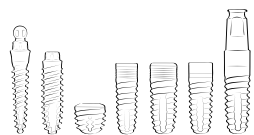


Abutment multifunzionale copaSKY exso

L'abutment copaSKY exso è la soluzione ideale per protocolli efficienti con un ridotto numero di componenti. Lo stesso abutment viene utilizzato sia per la presa dell'impronta che come abutment definitivo. Nella versione con la compensazione dell'angolazione, l'abutment multifunzionale viene utilizzato come elemento di correzione per la distribuzione delle forze di carico sugli impianti leggermente inclinati.

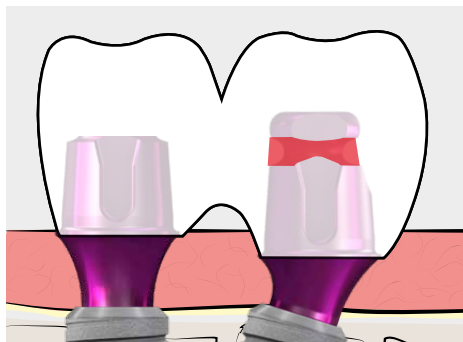


- Le riabilitazioni con ponti e corone cementate sugli abutment copaSKY exso vengono realizzate in modo semplice, veloce, con un elevato risultato estetico, e contenendo i costi, poichè:

transfert da impronta = abutment definitivo

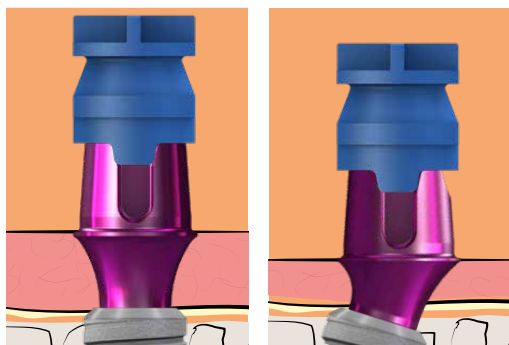

- Facile presa dell'impronta di impianti inclinati grazie alla compensazione dell'angolazione fino a 20°
- Utilizzo della cappetta per l'impronta a strappo SKY (REF SKYnPAKA)

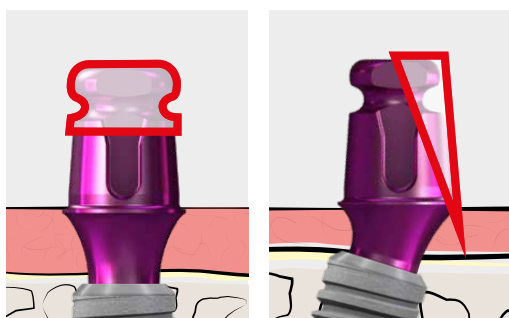


- Gli abutment possono essere facilmente individualizzati in laboratorio, garantendo un risultato estetico ottimale

copaSKY exso - Abutment multifunzionale




Abutment copaSKY per ponti e barre

Le protesi avvitare direttamente di ponti incollati richiedono in molti casi una compensazione dell'angolazione. Inoltre è molto importante che le forze di carico laterali e occlusali vengano trasmesse direttamente sull'impianto.

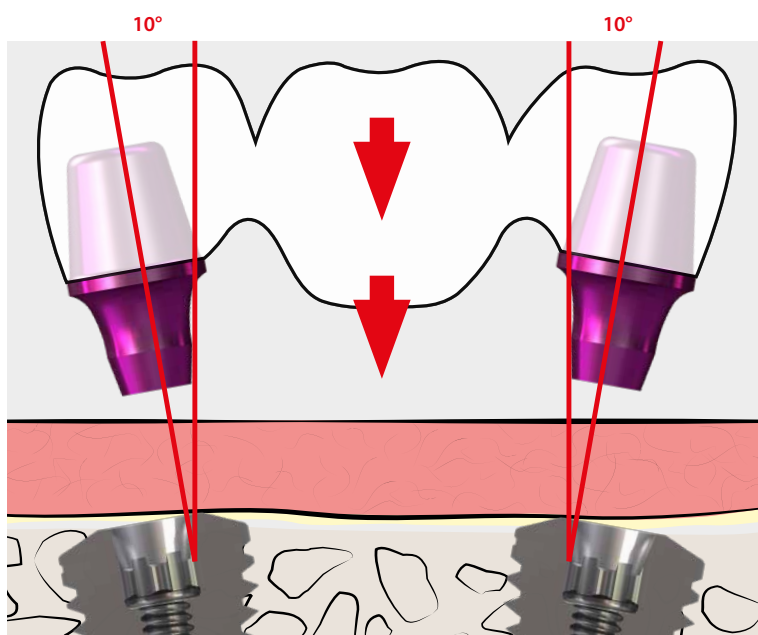


L'abutment per ponti copaSKY non è dotato di dispositivo antirotazionale. La connessione conica permette una compensazione dell'angolazione di 20° tra i due impianti, in modo tale che i ponti possano essere incollati in laboratorio.

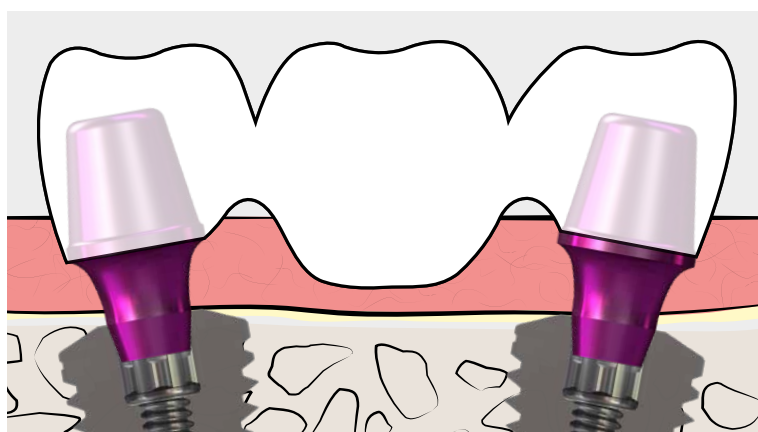

La costruzione può essere facilmente inserita ed avvitata occlusalmente. La lunga conicità trasmette le forze laterali e occlusali direttamente sull'impianto proteggendo le viti da allentamenti e fratture.

Abutment copaSKY per ponti e barre



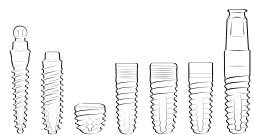


Abutment copaSKY uni.cone

Il nome di questo componente racchiude già in sé tutta la sua versatilità. Una soluzione universale che completa i migliori protocolli protesici e che, grazie a processi standardizzati, garantisce maggiore sicurezza e riduce i costi, indipendentemente dal tipo di sistema implantare utilizzato.



L'impianto corto copaSKY è particolarmente indicato per evitare estensioni con più di un elemento nel caso di riabilitazioni con il sistema SKY fast & fixed - la riabilitazione viene realizzata con gli abutment copaSKY uni.cone.

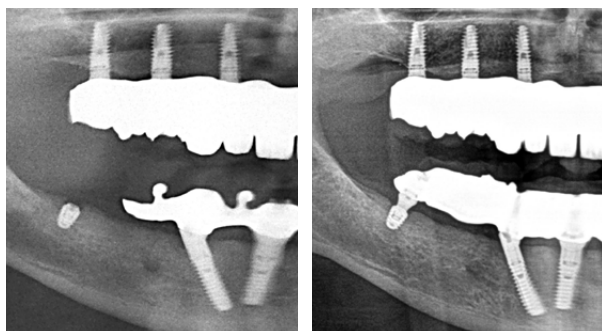

I componenti protesici degli abutment copaSKY uni.cone sono gli stessi utilizzati per gli abutment SKY uni.cone e quindi viene eseguito lo stesso protocollo protesico.

Foto: PD Dr. Jörg Neugebauer, Landsberg am Lech, Germania



Abutment copaSKY uni.cone


Con i nuovi abutment copaSKY uni.cone vengono utilizzate le cappette protesiche SKY uni.cone.

Componenti protesici SKY uni.cone



copaSKY TiSi.snap - Ancoraggio della protesi

L'ancoraggio di una protesi su impianti inseriti solo in regione frontale, spesso può portare ad un riassorbimento osseo in regione posteriore, compromettendone la stabilità e generando insoddisfazione nei pazienti con un conseguente aumento della frequenza delle visite in studio. L'utilizzo dell'abutment TiSi.snap in combinazione con il silicone retention.sil sull'impianto copaSKY offre una soluzione alternativa che permetterà di risolvere questi problemi.

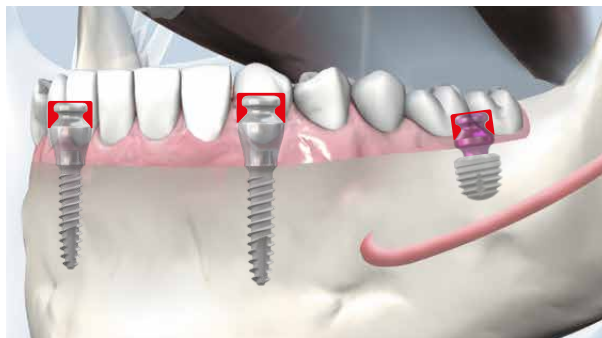


Grazie all'impianto ultra-short copaSKY, inserito in regione posteriore, sarà possibile sfruttare il tessuto osseo preesistente e riabilitare il paziente senza dover eseguire complessi interventi chirurgici e con una protesi ancorata in modo stabile.


Il silicone retention.sil è particolarmente indicato per l'ancoraggio della protesi, perchè offre al paziente un elevato comfort e la sensazione di una masticazione naturale.



TiSi.snap è indicato per essere utilizzato anche con gli elementi di ritenzione Locator.

Abutment copaSKY TiSi.snap

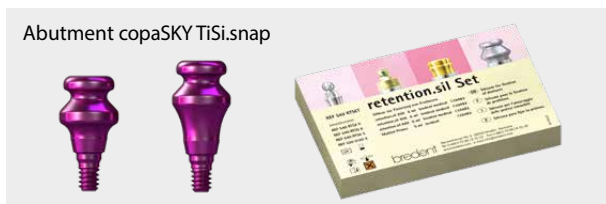


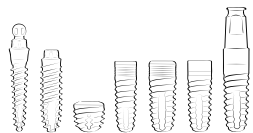

copaSKY - Restauri con sistemi CAD/CAM

L'avvento della digitalizzazione sta velocizzando sempre più il flusso di lavoro, garantendo una soluzione di continuità tra studio odontoiatrico e laboratorio odontotecnico. I nuovi componenti protesici appositamente sviluppati per il sistema copaSKY sono stati pensati per questi moderni workflow.

Un workflow completo per tutti i sistemi aperti CAD/CAM in laboratorio

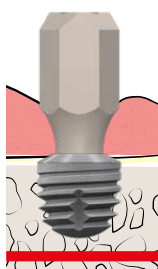


Lo Scan-Abutment permette una presa dell'impronta digitale ottimale sia con scanner intraorali che extraorali.



L'analogo implantare 3D-Print per modelli stampati:


- Un piccolo sottosquadro porta rapidamente l'analogo implantare alla posizione finale
- Il sicuro ancoraggio con la vite permette di rinunciare ad una complessa fase di incollaggio

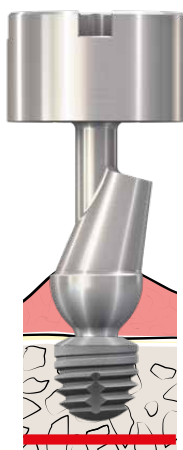

Con l'utilizzo dei prefab copaSKY in titanio o in BioHPP si possono realizzare abutment individuali, ottenendo un risultato estetico ottimale.

copaSKY - Restauri con sistemi CAD/CAM



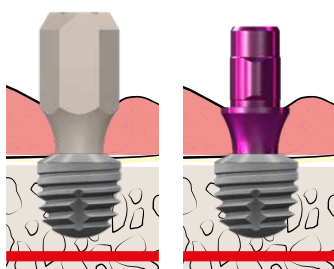


Base in titanio copaSKY uni.fit CAD per realizzare abutment individuali in ossido di zirconio o in disilicato di litio.

È possibile scaricare dalla nostra biblioteca CAD i record di dati degli abutment copaSKY CAD/CAM per i seguenti programmi CAD:

- exoCAD
- DentalWings
- 3 shape

www.bredent-medical.com/cad-library

Basi in titanio per il workflow alla poltrona con il sistema CEREC®

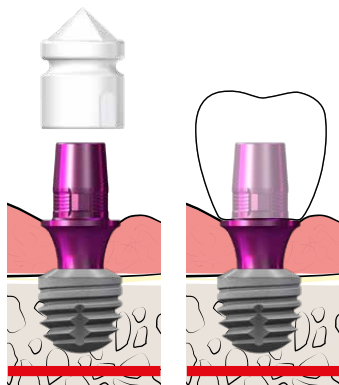


Con le basi in titanio copaSKY L per il sistema CEREC® è possibile realizzare abutment individuali anche con un workflow alla poltrona.

Base in titanio copaSKY uni.fit


Base in titanio copaSKY L per il sistema CEREC®



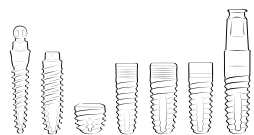

Panoramica del sistema copaSKY

Impianti

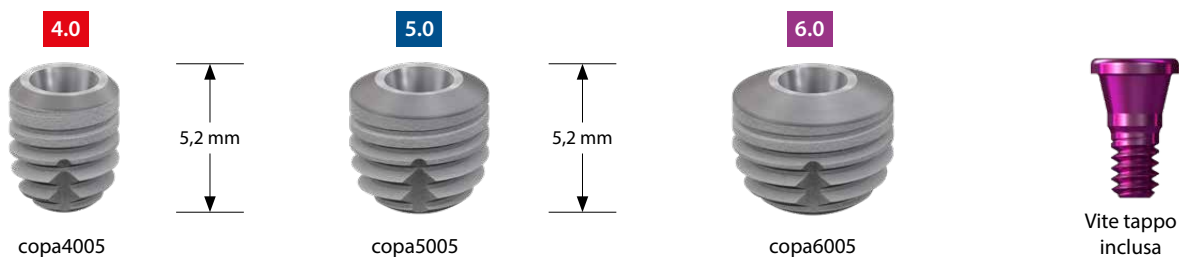

Strumenti

copaSKY
Upgrade Kit
REF COPAUPGK



Fresa pilota



copaSKY
Frese 6.0



copaSKY
Stop di
perforazione



copaSKY TK
Mounter per
micromotore chirurgico

copaSKY - Chirurgici e protesici

BioHPP copaSKY
elegance Abutment



COPAEM00 COPAEM15

copaSKY elegance
Base in titanio 0°



COPAETBM

copaSKY
elegance
Base in titanio 0°



COPEPMST

copaSKY uni.cone
Abutment



COPAUC01 COPAUC02 COPAUC03

Protesi SKY uni.cone



SKYUCGF2 SKYUCREG SKYUCSNP SKYUCAGK SKYUCAOL SKYUSCIE SKYUCTLA SKYdUCLA SKYUCPKT SKYUCPKC SKYUCPKK SKYUCPKS

Sistemi aperti CAD/CAM

copaSKY uni.fit
Scan-Abutment
intra- ed extraorale



COPAUSCI

Set copaSKY prefab in
titanio



COPPFTST

copaSKY uni.fit
base in titanio



COPAUTB2 COPAUTB3

Sistemi chiusi CAD/CAM


copaSKY base in titanio L
per sistema CEREC®



COPCTBL2 COPCTBL3

Accessori

copaSKY
Analogo implantare
3D-Print

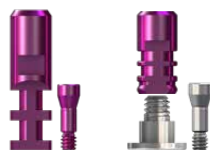

COPAIA50 COPDIA50

copaSKY
Adattatore gengivale

2 mm 4 mm 6 mm



COPAGF22 COPAGF34 COPAGF36

copaSKY Transfert per
impronta a strappo



COPAGL21 COPAGL31

copaSKY Transfert per
impronta finestrata



COPAPA22 COPAPA32

Abutment

Abutment copaSKY exso



COPEX002 COPEX172 COPEX003 COPEX173 SKYnPAKA

copaSKY abutment in titanio



COPAPO00 COPAPO15 COPAPO16

Abutment copaSKY per ponti e barre



COPABRS2 COPABRS3 mSKYpara

Abutment copaSKY
TiSi.snap



COPTISI2 COPTISI3

retention.sil Set



580RTSET

copaSKY
Vite per abutment
M1,6



COPASM16

copaSKY
Vite da
laboratorio M1,6



COPALM16



La storia del successo del sistema implantare SKY ha avuto inizio nel 2003. Fino ad oggi odontoiatri e odontotecnici di tutto il mondo hanno scelto di utilizzare con fiducia oltre un milione di impianti SKY e circa 2,5 milioni di componenti protesici del nostro sistema, per restituire ai loro pazienti una masticazione corretta e funzionale, un risultato estetico ottimale e quindi garantire loro una migliore qualità di vita.

Per le riabilitazioni a carico immediato, blueSKY è l'impianto in titanio che ha riscosso il maggiore successo. Dotato di un'eccezionale stabilità primaria, blueSKY costituisce il fulcro del nostro protocollo terapeutico SKY fast & fixed per arcate edentule o prossime ad una completa edentulia. Dal 2007 i pazienti sono stati riabilitati con successo grazie alla combinazione del sistema SKY fast & fixed con materiali fisiologici, come il BioHPP, e con la terapia aPDT in base al protocollo del sistema HELBO (terapia antimicrobica fotodinamica).

Entrate a far parte anche Voi della „SKY Community“ e venite a scoprire le molteplici possibilità che, grazie a soluzioni terapeutiche all'avanguardia e a numerosi servizi offerti dalla bredent group, incrementeranno per lungo tempo il successo del Vostro studio o del Vostro laboratorio, incontrando la soddisfazione dei Vostri pazienti.



Salvo modifiche ed errori

00993201-20200116

® Marchi o loghi aziendali registrati:
SKY®, whiteSKY®, blueSKY®, Torx® osseo-connect-surface (ocs)®, BioHPP®, visio.lign®



Distributore per l'Italia:
bredent s.r.l.

DENTAL INNOVATIONS
SINCE 1974

bredent group