



Bone Growth Concept

Mehr Knochen.  
Mehr Patienten.  
Mehr Behandlungen.



Backtaper.

Mikrostrukturierung.

Subcrestale  
Positionierung.

Einen Schritt weiter  
als Plattform Switch –  
**Bone Growth Concept**  
von breident medical.

00912020D-20250325 Irrtum und Änderungen vorbehalten



50 years of breident

breident  
medical

breident  
group

breident medical GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany  
T: +49 7309 872-600 · F: +49 7309 872-635  
info-medical@breident.com · www.breident-medical.com

WIR ERWEITERN  
IHRE MÖGLICHKEITEN!



Schmal.

Lang.

Kurz.

Ultrakurz.

Lokal in Süddeutschland entwickelt mit langjähriger Erfahrung in Implantat-Lösungen, das zeichnet uns und unsere Produkte aus.

Unsere copaSKY Implantate eignen sich aufgrund ihrer innovativen Eigenschaften für jede Knochenhöhe.

Wir erweitern das Portfolio nach den klinischen Anforderungen unserer Nutzer. Nun haben Sie die Möglichkeit mit den schmalen Implantaten copaSKY 3.0 auch enge Lücken optimal zu versorgen.



360° IMPLANTOLOGY  
—MORE THAN IMPLANTS—

copa  
**SKY**  
IMPLANT SYSTEM

copaSKY 3.0

Für die schmale Lücke



NEU!

Schmal.  
Stabil.  
Sofort.

breident  
medical

# copaSKY 3.0

Begrenzter Platz.

Erweiterte Möglichkeiten.

Wie versorgen Sie schmale Lücken? Zukünftig mit copaSKY 3.0 und bei ausreichender Primärstabilität auch sofort. Es erweitert das copaSKY Implantatsystem und wird mit dem bewährten chirurgischen Vorgehen inseriert. Vorteile wie der mikrostrukturierte Backtaper, um ortsständigen Knochen optimal zu nutzen und Augmentation auch im Frontzahnbereich durch die schlanke Form zu vermeiden, bleiben Ihnen erhalten.

Die prothetische Versorgung erfolgt mit dem vorhandenen Produktportfolio.

Mit Sicherheit schließen Sie bald auch die schmalste Lücke.

## Indikation



### Einzelzahn Versorgung

Für alle Lücken mit maximal 6 mm  
 Oberkiefer | 12, 22  
 Unterkiefer | 32, 31, 41, 42



### Schaltlücke

Mesial | copaSKY 3.0  
 Distal | copaSKY ≥ 3.5



### Full-Arch Versorgung

Front | copaSKY 3.0  
 Posterior | copaSKY ≥ 3.5



### Prothesenfixierung auf 4 Implantaten

Front | copaSKY 3.0  
 Posterior | copaSKY ≥ 3.5



Für die schmale Lücke.  
 ≤ 6 mm

Subkrestale Positionierung bis 2 mm möglich.

Schmale Implantate mit breitem Einsatzgebiet.

Auch in schmalen Lücken ist ausreichend Abstand zum Nachbarzahn vorhanden.\*



\*Zentrale Lasteinleitung über die Implantatachse notwendig

## Aufbau des Implantats

### Konisch-zylindrische Implantatform


→ optimale, gleichmäßige Lastenverteilung der Kaukräfte

### Kompressionsgewinde

→ knochenschonend bei hoher Primärstabilität

### Gewindesteigung

→ selbstschneidendes Doppelgewinde sorgt für schnelle und atraumatische Insertion

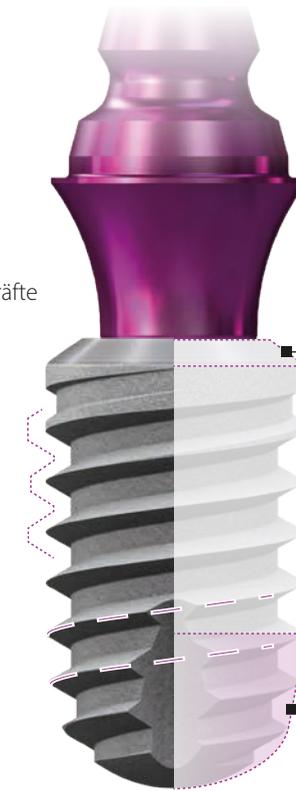

Schmales Durchtrittsprofil des Abutments  
 → ermöglicht gute Weichgewebsanlagerung

Breiter Backtaper  
 → sorgt für stabilen Knochen durch Knochenanlagerung



Bone Growth Concept

Zylinder  
 → sorgt für Primärstabilität

Konus  
 → erleichtert und beschleunigt die Insertion

## Implantat-Aufbau-Verbindung

### Konisch-parallele copaSKY-Verbindung



- eine Verbindungsgeometrie für alle Durchmesser – Reduktion des Prothetiksorbitments und vereinfachte Lagerhaltung, sowie erhöhte Prozesssicherheit
- stabile und reversible konisch-parallelwandige Implantat-Aufbau-Verbindung für eine leichte Entnahme der Prothetik

### copaSKY 3.0

- gleiche Implantat-Aufbau-Verbindung
- gleiche Form & gleiches Design
- gleiche Oberflächen

NEU!

### Torx

→ Goldstandard bei der Insertion mit hohen Drehmomenten



→ keine Schäden am Implantat und kein Verkleben der Einbringinstrumente