



Bone Growth Concept

Mehr Knochen.
Mehr Patienten.
Mehr Behandlungen.



Backtaper.

Mikrostrukturierung.

Subcrestale
Positionierung.

Einen Schritt weiter
als Plattform Switch –
Bone Growth Concept
von brendent medical.

0091 2020D-20260209 Irrtum und Änderungen vorbehalten



brendent
medical

brendent
group

brendent medical GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2
89250 Senden · Germany · T: +49 7309 872-600
info-medical@brendent.com · www.brendent-medical.com

WIR ERWEITERN
IHRE MÖGLICHKEITEN!



Schmal.

Lang.

Kurz.

Ultrakurz.

Lokal in Süddeutschland entwickelt mit langjähriger Erfahrung in
Implantat-Lösungen, das zeichnet uns und unsere Produkte aus.

Unsere copaSKY Implantate eignen sich aufgrund ihrer innovati-
ven Eigenschaften für jede Knochenhöhe.

Wir erweitern das Portfolio nach den klinischen Anforderungen
unserer Nutzer. Nun haben Sie die Möglichkeit mit den
schmalen Implantaten copaSKY 3.0 auch enge Lücken optimal
zu versorgen.



360° IMPLANTOLOGY
—MORE THAN IMPLANTS—

copa
SKY
IMPLANT SYSTEM

copaSKY 3.0

Für die schmale Lücke



NEU!

Schmal.
Stabil.
Sofort.

brendent
medical

copaSKY 3.0

Begrenzter Platz.

Erweiterte Möglichkeiten.

Wie versorgen Sie schmale Lücken? Zukünftig mit copaSKY 3.0 und bei ausreichender Primärstabilität auch sofort. Es erweitert das copaSKY Implantatsystem und wird mit dem bewährten chirurgischen Vorgehen inseriert. Vorteile wie der mikrostrukturierte Backtaper, um ortsständigen Knochen optimal zu nutzen und Augmentation auch im Frontzahnbereich durch die schlanke Form zu vermeiden, bleiben Ihnen erhalten.

Die prothetische Versorgung erfolgt mit dem vorhandenen Produktportfolio.

Mit Sicherheit schließen Sie bald auch die schmalste Lücke.

Indikation



Einzelzahn Versorgung

Für alle Lücken mit maximal 6 mm
Oberkiefer | 12, 22
Unterkiefer | 32, 31, 41, 42



Schaltlücke

Mesial | copaSKY 3.0
Distal | copaSKY ≥ 3.5



Full-Arch Versorgung

Front | copaSKY 3.0
Posterior | copaSKY ≥ 3.5



Prothesenfixierung auf 4 Implantaten

Front | copaSKY 3.0
Posterior | copaSKY ≥ 3.5



Für
die
schmale
Lücke.
≤ 6 mm

Subkrestale Positionierung
bis 2 mm möglich.

Schmale Implantate mit
breitem Einsatzgebiet.

Auch in schmalen Lücken ist ausreichend
Abstand zum Nachbarzahn vorhanden.*



*Zentrale Lastenleitung über die Implantatachse notwendig

Aufbau des Implantats

Konisch-zylindrische Implantatform


→ optimale, gleichmäßige Lastenverteilung der Kaukräfte

Kompressionsgewinde

→ knochenschonend bei hoher Primärstabilität

Gewindesteigung

→ selbstschneidendes Doppelgewinde sorgt für
schnelle und atraumatische Insertion

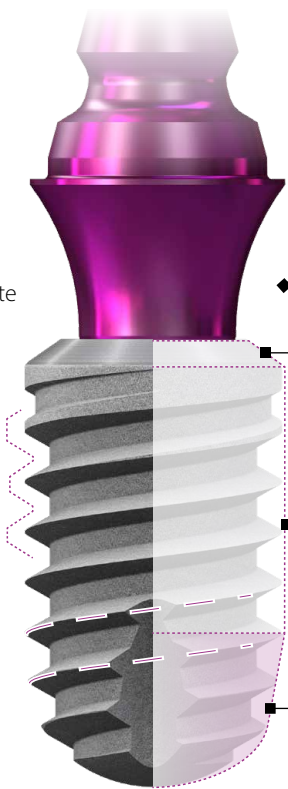

Schmales Durchtrittsprofil des Abutments

→ ermöglicht gute Weichgewebsanlagerung

Breiter Backtaper

→ sorgt für stabilen Knochen
durch Knochenanlagerung



Bone Growth Concept

Zylinder

→ sorgt für Primärstabilität

Konus

→ erleichtert und
beschleunigt die Insertion

Implantat-Aufbau-Verbindung

Konisch-parallele copaSKY-Verbindung



- eine Verbindungsgeometrie für
alle Durchmesser – Reduktion
des Prothetiksortiments und
vereinfachte Lagerhaltung, sowie
erhöhte Prozesssicherheit
- stabile und reversible konisch-
parallelwandige Implantat-Aufbau-
Verbindung für eine leichte
Entnahme der Prothetik

copaSKY 3.0

- gleiche Implantat-Aufbau-Verbindung
- gleiche Form & gleiches Design
- gleiche Oberflächen

NEU!

Torx

→ Goldstandard bei
der Insertion mit hohen
Drehmomenten



→ keine Schäden am
Implantat und kein Verkleben
der Einbringinstrumente

TORX® ist eine eingetragene Marke von Acument Intellectual Properties, LLC. Die Bezeichnung TORX® wird in diesem Flyer ausschließlich beschreibend verwendet und impliziert keine Lizenzierung, Kooperation oder sonstige Verbindung zwischen Acument Intellectual Properties, LLC und der bredent group.