



Bone Growth Concept

Plus d'os.
Plus de patients.
Plus de traitements.

Col conique.

Surface micro-structurée.

Positionnement
sous-crestal.

Au-delà du platform-
Switching, le

Bone Growth Concept
de bredent medical



0091 2020F-20260209 Sous réserve d'erreurs et de modifications



bredent
medical

bredent
group

bredent France · T: 0800 90 48 57 · france@bredent.com
bredent medical GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany
www.bredent-medical.com

NOUS MULTIPLIONS
VOS ALTERNATIVES
DE TRAITEMENTS !



Étroit.

Long.

Court.

Ultra-court.

Développés localement dans le sud de l'Allemagne avec une grande expérience dans les solutions implantaire et prothétiques, c'est ce qui nous distingue, ainsi que nos produits.

Nos implants copaSKY conviennent à toutes les hauteurs d'os grâce à leurs propriétés innovantes.

Nous élargissons le portefeuille produits en fonction des besoins cliniques de nos utilisateurs. Grâce aux implants étroits copaSKY 3.0, vous pouvez désormais traiter de manière optimale les espaces étroits.



360° IMPLANTOLOGY
—MORE THAN IMPLANTS—

copa
SKY
IMPLANT SYSTEM

copaSKY 3.0

Pour les espaces étroits



NOUVEAU !

Étroit.
Stable.
Immédiat.

bredent
medical

copaSKY 3.0

Espace limité.
Des possibilités multipliées.

Comment combler les espaces étroits ? Dès demain avec copaSKY 3.0 et si la stabilité primaire est suffisante, immédiatement. Il complète le système d'implant copaSKY et s'insère selon la procédure chirurgicale éprouvée. Les avantages tels que le backtaper microstructuré pour utiliser de manière optimale l'os local et, grâce à sa forme élancée, éviter l'augmentation même dans la zone des dents antérieures, vous sont préservés. La restauration prothétique s'effectue avec la gamme de produits existante. Vous pourrez ainsi combler rapidement les plus petits espaces.

Indication



Restauration d'une seule dent

Pour tous les espaces de 6 mm maximum
Maxillaire | 12, 22
Mandibule | 32, 31, 41, 42



Espace antérieur édenté

Mésial | copaSKY 3.0
Distal | copaSKY ≥ 3.5



Restauration Full-Arch

Antérieur | copaSKY 3.0
Postérieur | copaSKY ≥ 3.5



Fixation de la prothèse sur 4 implants

Antérieur | copaSKY 3.0
Postérieur | copaSKY ≥ 3.5



Pour
les
espaces
étroits.
≤ 6 mm

Positionnement sous-crestal possible jusqu'à 2 mm.

Implants étroits avec un large domaine d'application.


Même dans les espaces étroits, la distance par rapport à la dent voisine est suffisante.*



*Introduction centrale de la charge par l'axe de l'implant nécessaire

Structure de l'implant

- Forme cylindro-conique l'implant**
→ répartition optimale et uniforme des forces de mastication
- Filet compressif**
→ préservant l'os et offrant une grande stabilité primaire
- Double filetage**
→ autotaraudant pour une insertion rapide et atraumatique

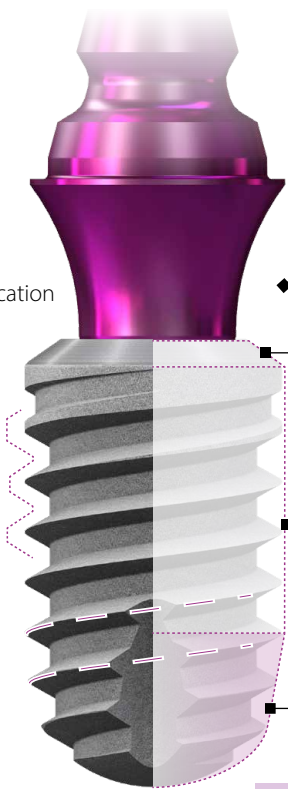

- Profil concave et étroit du pilier**
→ permet une bonne adhérence des tissus mous
- Col conique et large**
→ assure la stabilité de l'os grâce à l'adhérence osseuse
- Le cylindre**
→ assure la stabilité primaire
- Le cône**
→ facilite et accélère l'insertion



Connexion implant-pilier

Assemblage conico-parallèle copaSKY




- Une géométrie d'assemblage pour tous les diamètres – réduction de l'assortiment de pièces prothétiques et simplification du stockage ainsi qu'amélioration de la sécurité du processus
- Connexion conico-parallèle unique, stable et réversible pour un retrait aisé de la prothèse

copaSKY 3.0

- Connexion implant-pilier identique aux autres diamètres d'implants
- même forme et design
- même surface

NOUVEAU !

Torx
→ référence en matière d'insertion avec des couples élevés

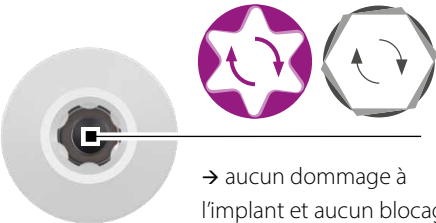

→ aucun dommage à l'implant et aucun blocage des instruments d'insertion

TORX® est une marque déposée d'Acument Intellectual Properties, LLC. La désignation TORX® est utilisée dans ce dépliant exclusivement à des fins descriptives et n'implique aucune licence, coopération ou autre lien entre Acument Intellectual Properties, LLC et le bredent group.