



Kemik Büyüme Konsepti
Bone Growth Concept

Daha fazla kemik
Daha fazla hasta
Daha fazla tedavi



Backtaper.

Mikroyapılandırma.


Subkrestal
konumlandırma.

Switch platform
konseptinin bir adım ötesinde –
Kemik Büyüme Konsepti.
bredent medical'den

0091 20268-20250325



SİZE SUNDUĞUMUZ
SEÇENEKLERİ GENİŞLETİYORUZ!

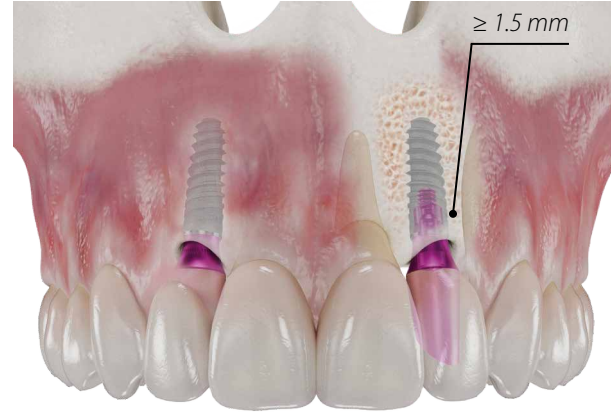

İnce.

Uzun.


Kısa.

Ultra Kısa.

copaSKY 3.0, implant çözümlerindeki uzun yıllara dayanan deneyimimizle Almanya'nın güneyinde, yerel olarak geliştirildi – bu da bizi ve ürünlerimizi farklı kılan noktadır.

copaSKY implantlarımız, yenilikçi özellikleri sayesinde her kemik yüksekliğine uygundur.

Klinik ihtiyaçlarınıza göre portföyümüzü genişlettik. Artık copaSKY 3.0 narrow (dar) implantlar ile daha dar boşlukları bile optimum şekilde tedavi etme seçeneğine sahipsiniz.

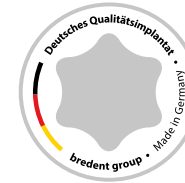

360° İMPLANTOLOJİ
— SADECE İMPLANTTAN DAHA FAZLASI —

copa
SKY
İMPLANT SİSTEMİ

copaSKY 3.0

Dar Boşluklar İçin



YENİ!

İnce.
Stabil.
Anında.
(İmmediyat)

bredent
medical

copaSKY 3.0

Sınırlı alanlar.

Daha fazla seçenek.

Dar boşluklara nasıl restorasyon yapılır?
Artık copaSKY 3.0 ile.

Yeterli primer stabilite varsa anında (immediyat) kullanım için de idealdir. copaSKY implant sistemine ek olarak geliştirilmiş olup, yerleştirme prosedürü alışılmış cerrahi teknikle yapılır. İnce formu sayesinde, ön bölge dahil olmak üzere bölgedeki mevcut kemiğin optimum kullanımı sağlanır ve greftleme gerektirmez. Protetik restorasyon, mevcut ürün portföyü ile gerçekleştirilir. Gönül rahatlığıyla, en küçük boşluğu bile kapatabileceğinize emin olabilirsiniz.

Endikasyonlar



Bireysel Diş Restorasyonu

Maksimum 6 mm genişliğe kadar tüm boşluklar.

Alt Çene	12, 22
Üst Çene	32, 31, 41, 42



Dişsiz Alanlar

Mezial	copaSKY 3.0
Distal	copaSKY ≥ 3.5



Tam Ark Restorasyonu

Ön	copaSKY 3.0
Arka	copaSKY ≥ 3.5



4 İmplant ile Protez Sabitleme

Ön	copaSKY 3.0
Arka	copaSKY ≥ 3.5



Dar boşluklar için.
≤ 6 mm

Subkrestal yerleşim
2 mm'ye kadar mümkündür.

İnce implantlar, çok çeşitli kullanım alanlarına sahiptir.

Dar boşluklarda komşu dişe olan mesafe de yeterlidir.*



*İmplant aksı üzerinden merkezi yük uygulanması gereklidir.

İmplant yapısı

Konik-silindirik implant şekli

→ Çiğneme kuvvetlerinin optimal ve eşit dağılımı

Sıkıştırma yivleri


→ Yüksek primer stabilite ile kemiği korur

Yivler arası mesafe

→ Kendinden kesici çift sarmal yiv yapısı, implantın hızlı ve travmaasız yerleştirilmesini sağlar.

İmplant-abutment bağlantısı

Konik-paralel copaSKY bağlantısı

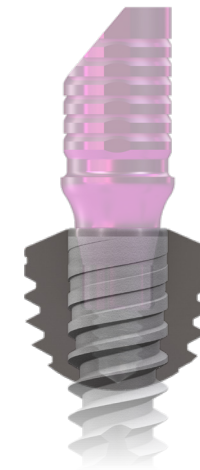

- Tüm çaplar için tek bağlantı geometrisi – protetik ürün yelpazesi azalır, stok yönetimi kolaylaşır, işlem güvenliği artar
- Kolay protetik söküm için stabil ve geri çıkarılabilir konik-paralel bir implant-abutment bağlantısı sağlar.



Dar abutment çıkış profili

→ Yumuşak dokunun etkili bir şekilde bağlanmasını sağlar.

Geniş backtaper

→ Kemik oluşumu sayesinde stabilite sağlar

Silindirik gövde

→ Primer stabiliteyi sağlar

Konik uç

→ Hızlı ve kolay yerleştirme sağlar



Kemik Büyüme Konsepti
Bone Growth Concept

copaSKY 3.0

- Aynı implant-abutment bağlantısı
- Aynı form ve tasarım
- Aynı yüzey özellikleri

YENİ!

Torx bağlantı

→ Yüksek torklu yerleştirme için altın standart



→ İmplantta hasar riski yok veya yerleştirme aletlerinde hasar riski yok

TORX®, Acument Intellectual Properties, LLC şirketinin tescilli markasıdır. TORX® ibaresi bu broşürde yalnızca açıklayıcı amaçla kullanılmaktadır ve Acument Intellectual Properties, LLC ile bredent group arasında herhangi bir lisans, iş birliği veya başka bir bağlantı ima etmez.