

SKY classic 3.5

narrow platform



DAS SCHLANKERE IMPLANTAT
KLASSISCH ZUVERLÄSSIG.



Schmale Lücken. Große Möglichkeiten.

*Das ideale Implantat für Situationen
mit begrenztem Platzangebot.*

Das SKY classic 3.5 narrow platform schafft den notwendigen
Raum für biologisch stabile und ästhetische Ergebnisse – selbst in
anspruchsvollen Situationen.

SKY
classic

WENIGER TITAN –
MEHR WEICHGEWEBE.

- Mehr Abstand zum Nachbarzahn
- Mehr Abstand zwischen zwei Implantaten
- Hohe Stabilität
- Implantate und Abutments haben denselben Durchmesser

◀ **Mehr Abstand** ▶
*für optimale Voraussetzungen,
stabile Papillen und Langzeiterfolg*

regular



narrow



Tissue Level neu gedacht.


STABILITÄT BEGINNT

IM WEICHGEWEBE.

Das Tissue-Level-Design verlagert die Implantat-Abutment-Verbindung aus dem Knochenbereich in das Weichgewebe und reduziert damit kritische Mikrobewegungen im krestalen Bereich.

- Optimale Weichgewebeintegration
- Erhalt der krestalen Knochenstruktur
- Geringeres Risiko für Periimplantitis
- Langfristig stabile Ergebnisse

osseo-connect-surface (ocs)[®]

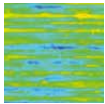


1,5 mm maschinerte Oberfläche

→ unterstützt die Anlagerung des Bindegewebes




0,5 mm geätzte Oberfläche

→ bietet Knochen und Weichgewebe Möglichkeiten zur Adaption

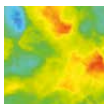

Gestrahlte & geätzte Oberfläche

→ für die Anlagerung der Osteoblasten zur schnellen Osseointegration

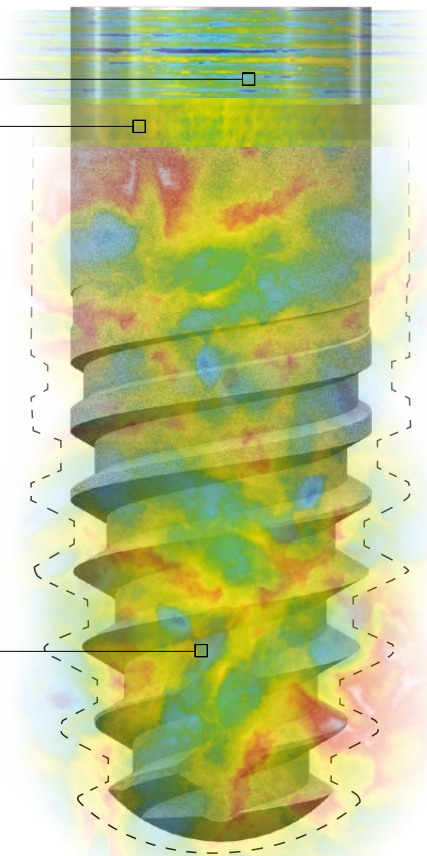

SKY[®]
classic

Das ideale Implantat in mehr als 60 % der Positionen.

Das **SKY classic narrow** platform ist ideal für die Implantatpositionen mit orangefarbenen Symbolen.


SKY classic narrow platform 

SKY classic regular platform 

FÜR BESTE ÄSTHETIK
MIT PAPILLEN- UND KNOCHENSTABILITÄT.

SKY classic narrow platform schafft den biologisch notwendigen Raum – für ästhetische Ergebnisse mit Papillen und langfristiger Knochenstabilität.

- Ausreichend Abstand zum Nachbarzahn (**mind. 1,5 mm**)
- Ausreichend Platz zwischen Implantaten
- Ausreichend Platz **für stabile Papillen und Knochen**

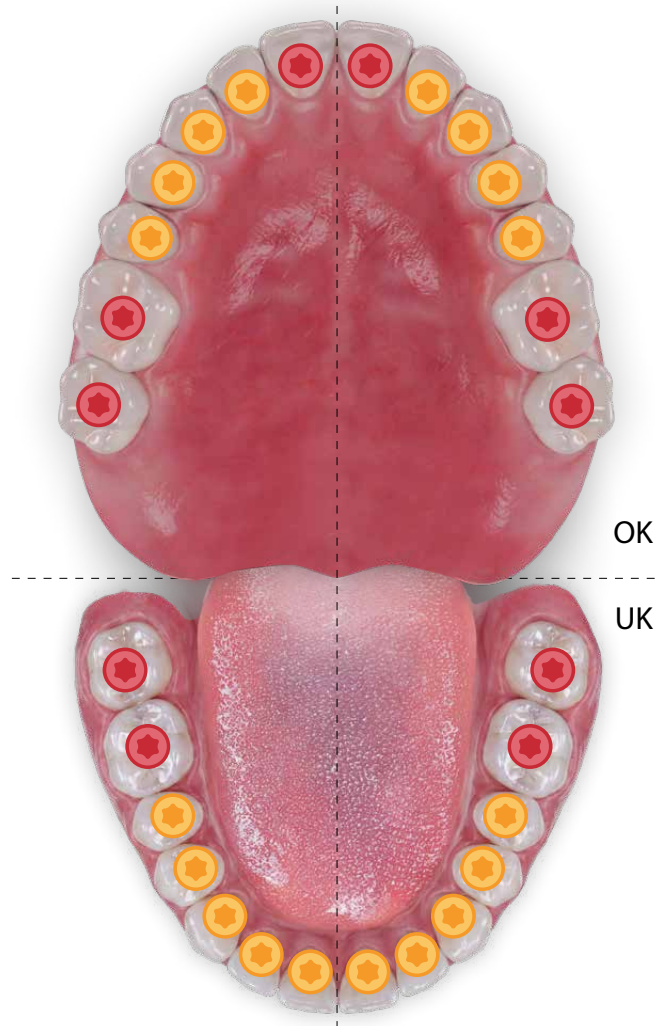

Hohe Flexibilität bei der Implantatpositionierung.


FÜR **ANSPRUCHSVOLLE**
ANATOMISCHE **SITUATIONEN.**

SKY 
classic

narrow
platform

Das SKY classic 3.5 narrow platform wird 1–2 mm subgingival positioniert und bietet optimale Bedingungen für eine stabile Weichgewebeintegration. Denn die suprakrestale Implantat-Abutment-Verbindung verhindert Mikrobewegungen im krestalen Knochen, wodurch langfristig stabile Verhältnisse im Hart- und Weichgewebe entstehen.

Dank hoher Flexibilität eignet sich das System besonders für anatomisch anspruchsvolle Situationen wie abfallende Knochenkämme oder dünne Gingiva. Die weichgewebsfreundliche Oberfläche trägt zusätzlich zur Reduktion des Periimplantitis-Risikos bei.

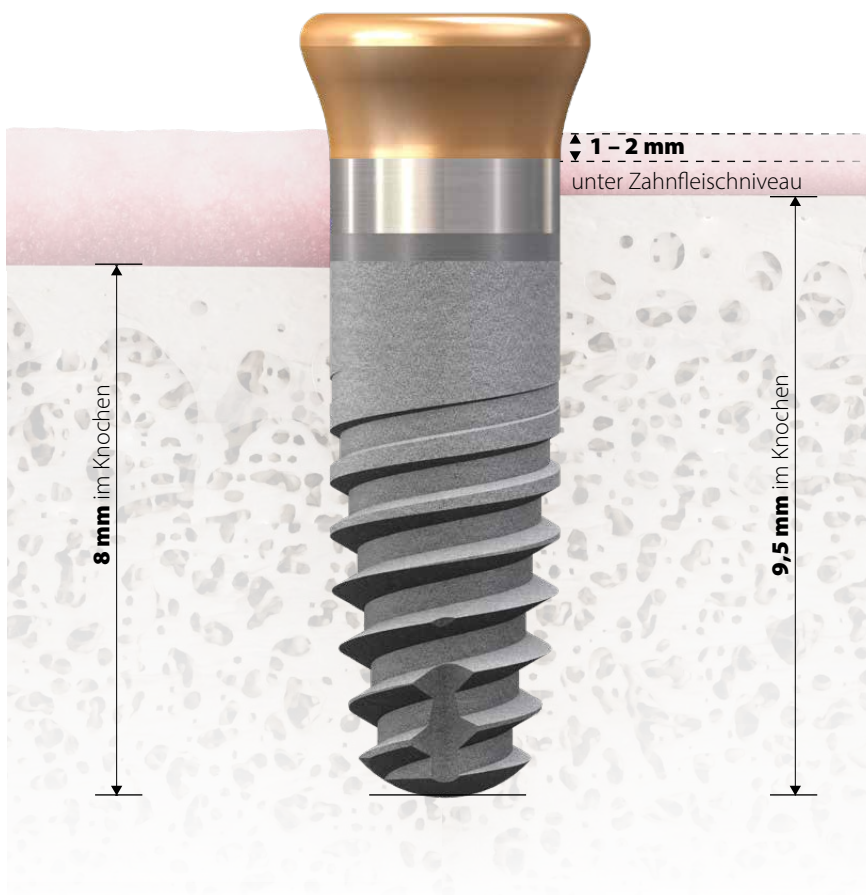

Variabilität

→ 1 – 2 mm unter Zahnfleischniveau und zwischen 8,0 – 9,5 mm im Knochen bei einem SKY classic 3,5 narrow platform der Länge 10 mm.

Weniger Hebelkräfte. Mehr Sicherheit.

HOHE MECHANISCHE STABILITÄT

DANK GERINGERER KRONENHÖHE.

Suprakrestale Implantate reduzieren die Kronenhöhe im Vergleich zu subkrestalen Implantaten um 2-3 mm. Kürzere Kronen reduzieren die Belastung um ca. 10% pro Millimeter.

- Höhere Schraubenstabilität und verbesserte Verankerung
- Zuverlässige Langzeit-Belastbarkeit des Aufbaus
- Höhere mechanische Stabilität und längere Lebensdauer



SKY 
classic

*3 mm längere Kronen
erhöhen die vertikale
Belastung um ca. 30%.*

SKY classic Überweiserworkflow

1

Der Chirurg setzt das Implantat in der geplanten Position und scannt während der OP die Implantatposition.


Eine offene Einheilung mit Gingivaformer vermeidet zusätzliche Chirurgie und verbessert die Ästhetik.



CHIRURG

2

Während der Einheilphase kann das Kronenabutment oder die Versorgung in aller Ruhe hergestellt werden.

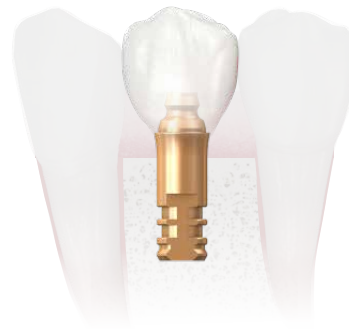

ÜBERWEISER

3

Bei der Eröffnung wird der Patient sofort versorgt – die schnellere Behandlung sorgt für glücklichere Patienten.



PATIENT

VORTEILE FÜR

den Chirurgen

- Höhere Effizienz
- Weniger Eingriffe
- Mehr Patienten

den Überweiser


- Schnelle Behandlung
- Planbare Abläufe
- Ästhetische Ergebnisse

den Patienten

- Weniger Termine
- Geringere Belastung durch weniger Interventionen



Bestellinformationen

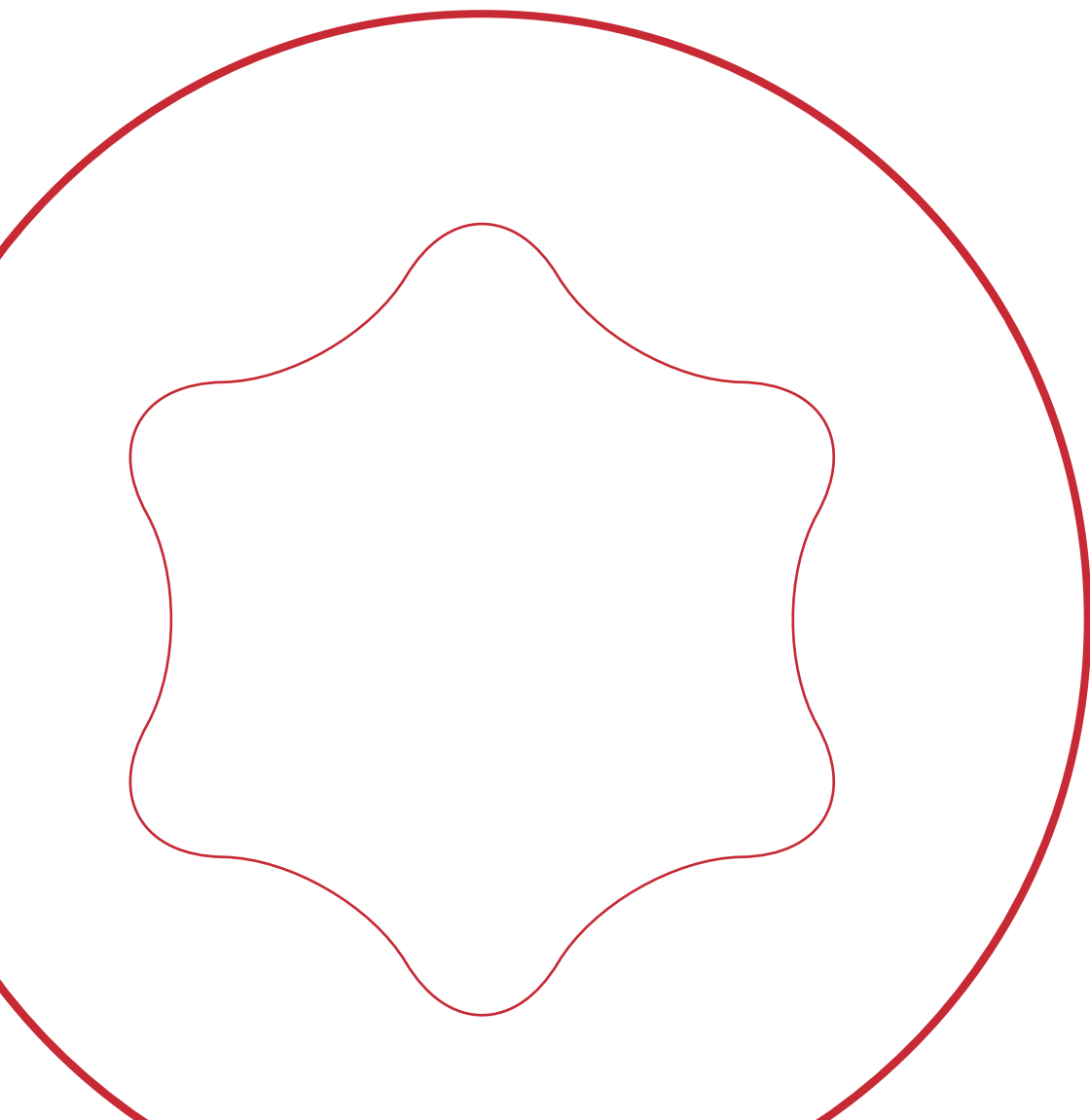

Implantate

L 8 mm

L 10 mm

L 12 mm

L 14 mm

L 16 mm

**narrow platform:*
Deckschraube wie bei narrowSKY



3.5

kSKY3510

kSKY3512

kSKY3514

kSKY3516



4.0

kSKY4008

kSKY4010

kSKY4012

kSKY4014

kSKY4016



4.5

kSKY4508


kSKY4510

kSKY4512


kSKY4514

SKY – Prothetik


SKY fast & fixed Zubehör

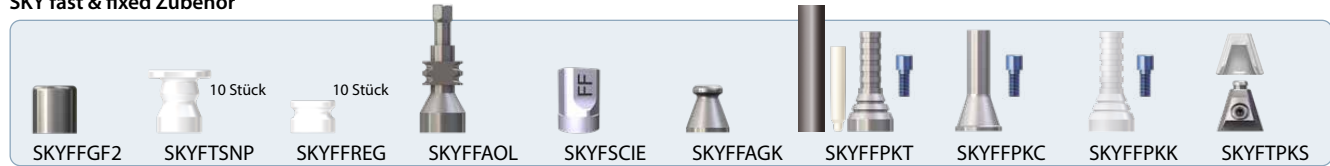


SKY fast & fixed Abutments

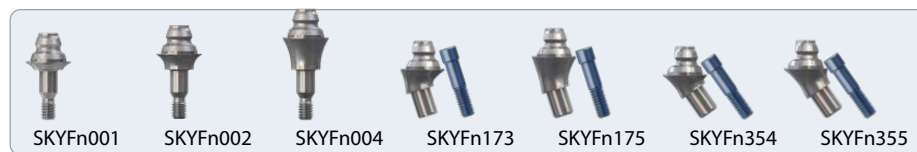


Laboranalogue

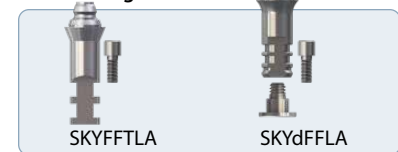

SKY uni.cone Zubehör

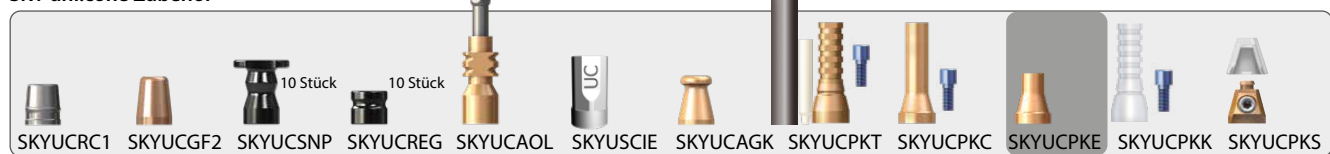

SKY uni.cone Abutments

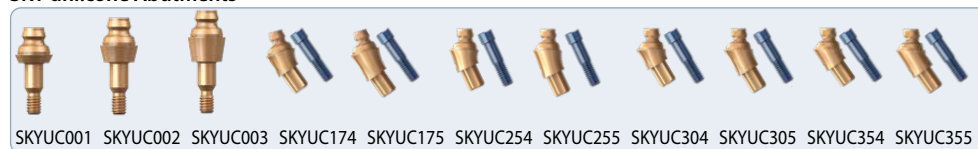

uni.cone Laboranalogue



BioHPP SKY elegance



Titanbasis




Offene CAD/CAM Systeme

SKY scan abutment 11 prefab Titan




Geschlossene Systeme

uni.fit Titanbasis

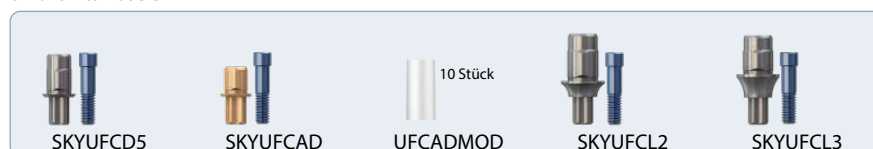


uni.fit Titanbasis S für CEREC®

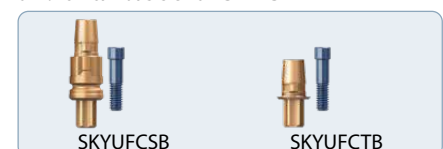


SKY Implantatanaloge


Gips 3D-Print / Gips

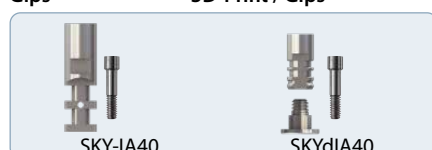

SKY Ti-base flex

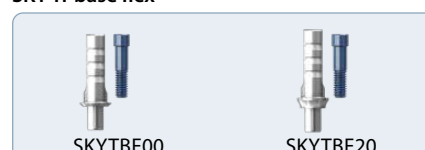


SKY Ti-base flex bridge

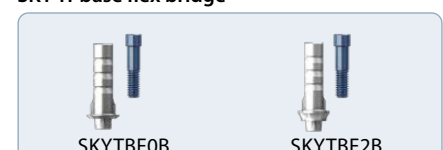

SKY esthetic Gingivaformer



SKY Abformabutments

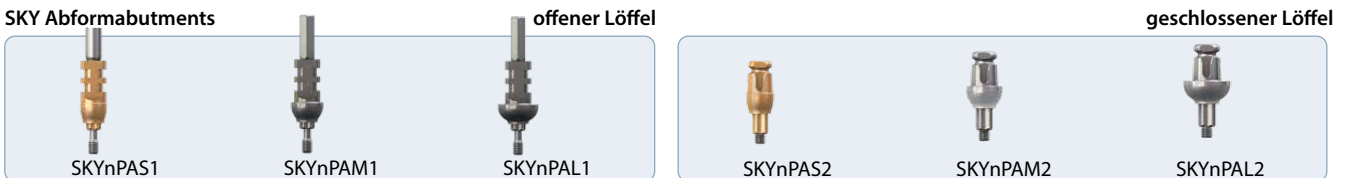

SKY EXSO



SKY esthetic



SKY Titanabutments



SKY TiSi.snap



retention.sil




SKY Schrauben Klinik



Labor


SKY Schrauben Prothetikappen

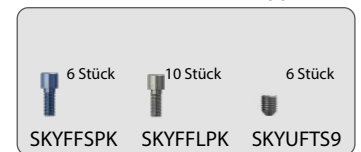


Docklocs®-Abutments 0°



Docklocs®-Abutments anguliert 18°

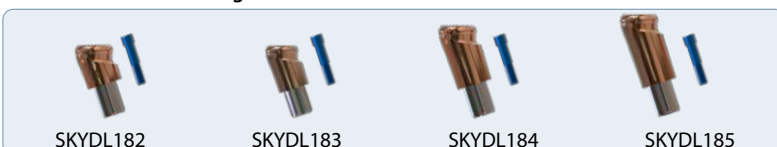

Docklocs®-Retentionsets (kompatibel mit Locator)

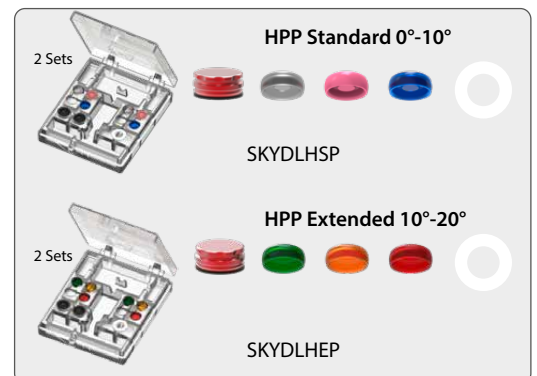



360° DENTAL COMPETENCY



<https://ifu.bredent-group.com/>

Einfacher Download einer Gebrauchsanweisung mithilfe Standard PC oder mobilem Endgerät und Software Adobe Acrobat Reader. Kostenlos unter: <https://get.adobe.com/de/reader/>. Eine gedruckte Version ist beim Hersteller innerhalb von 7 Tagen erhältlich (im Falle des Versandes in die EU).

© bredent medical GmbH & Co. KG, 2026

Alle Rechte vorbehalten. Inhalte dieser Publikation, insbesondere Texte, Bilder und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt.

Bildmaterial: bredent medical GmbH & Co. KG, Partner sowie externe Anwender.

Fallbeispiele wurden von den jeweiligen Anwendern zur Verfügung gestellt.

Irrtum und Änderungen vorbehalten.



00913030D_20260805

bredent
medical

bredent
group