



SKY

Система имплантатов



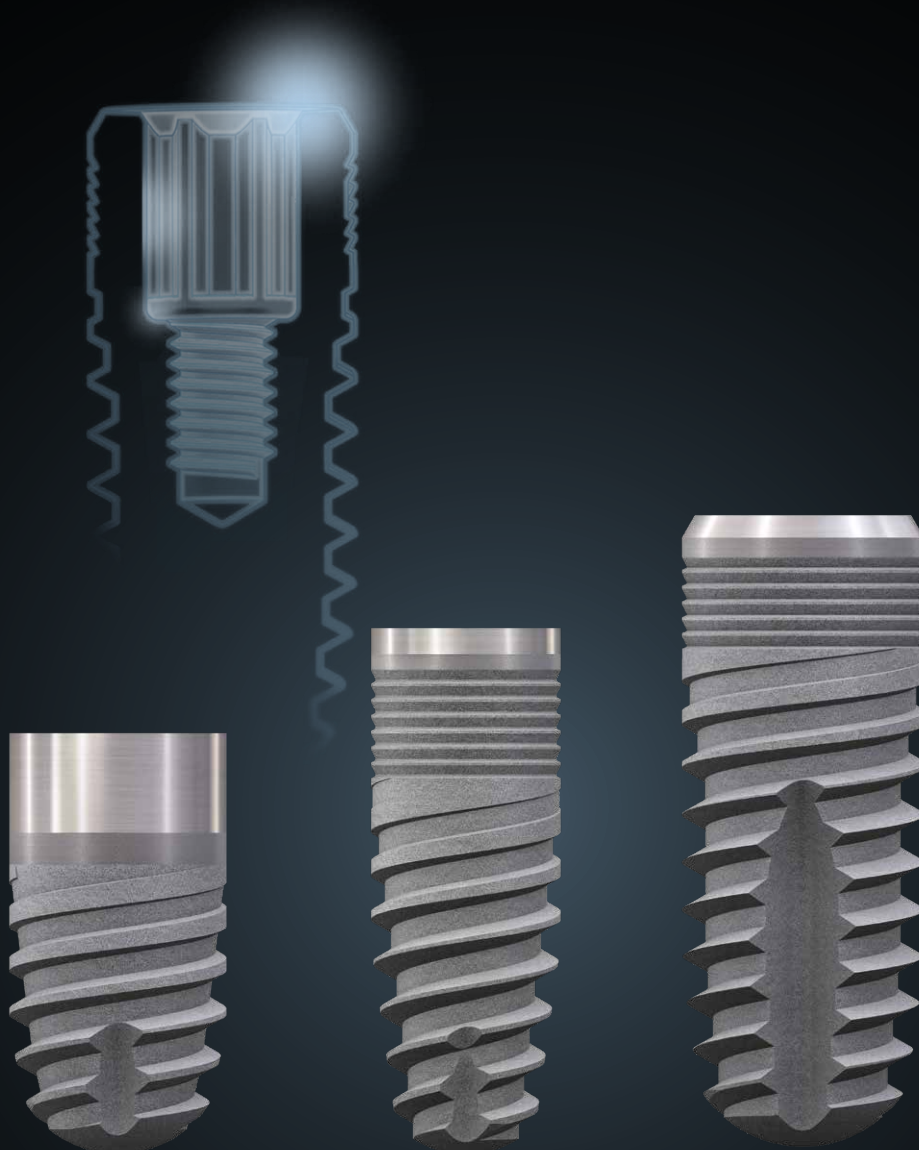

SKY **IMPLANT SYSTEM**

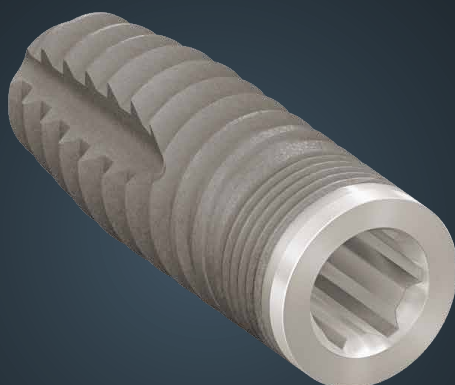

*ориентированная на
протезирование с высокой
первичной стабильностью
проверенная временем*

Проверенная миллионы раз система имплантатов SKY представлена на рынке с 2002 года. Благодаря высокой первичной стабильности при любом качестве кости она стала стандартом в области немедленного, раннего и последующего имплантологического протезирования. Длинное соединение имплантат-абатмент с соединением Torx облегчает протезирование. Портфолио компонентов для протезирования четко структурировано и предлагает подходящее решение для любых показаний.

SKY

Мнение специалистов



**Проф. Хакан
Озюваджи
(Hakan Özyüvaci)**

Dental Forum, Стамбул,
Турция

«Я использую систему имплантатов SKY от bredent medical с 2011 года. Я устанавливаю много имплантатов bredent blueSKY и copaSKY ultrashort, в основном для полнодугового протезирования SKY fast & fixed full-arch, потому что каждый раз при установке чувствую, как надежно садится имплантат. Первичная стабильность имплантата очень высокая, а соединение абатмент-имплантат крайне точное. Методики быстрого лечения с надежной фиксацией позволили сократить долю сложных хирургических вмешательств в нашей клинической практике. Эта система позволяет нам придерживаться принципа KISS (keep it safe and simple — безопасно и просто). В моей клинике в Стамбуле 99% имплантатов устанавливаются сразу после удаления зуба. На имплантаты производится немедленное протезирование, так как они почти всегда достигают высокой первичной стабильности. Такой рабочий процесс помогает пациентам легче согласиться на лечение и повышает их удовлетворенность результатом. Кроме того, имплантаты SKY производятся в Германии в соответствии с высочайшими стандартами качества и имеют многочисленные сертификаты, например, сертификат Clean Implant. Я абсолютно уверен в результате, когда использую имплантационную систему bredent medical».



**Д-р Джованни
Гирланда
(Giovanni Ghirlanda)**

Рим, Италия

«С 2007 года я установил тысячи имплантатов bredent medical и следил за развитием всего ассортимента продукции — от SKY classic до новейшего copaSKY. Предсказуемость, простота и универсальность — вот ключевые понятия, которые у меня ассоциируются с имплантационной системой SKY от bredent medical. Уникальные соединения (Torx или параллельно-коническое), а также особая форма резьбы имплантата дают стоматологу мощный инструмент для работы в сложных условиях, например, при немедленной нагрузке в эстетически значимой зоне, где клинический результат имеет решающее значение».

«Как пародонтолог я знаю, насколько важно наряду с остеоинтеграцией добиться хорошей мукоинтеграции, ведь именно она является основой успеха современной имплантационной терапии. С 2017 года я использую имплантат blueSKY от bredent medical и особенно ценю его первичную стабильность при работе в эстетически значимой зоне. Кроме того, имплантат narrowSKY, аналогичный blueSKY, отлично подходит для области боковых резцов, в том числе при общей атрофии челюсти. Широкий выбор биосовместимых компонентов для протезирования позволяет мне создавать конструкции для различных показаний в полной гармонии с мягкими тканями. Эти имплантаты, имеющие серьезную научно-доказательную базу, разработанные и сертифицированные в Германии, полностью восстанавливают функцию и эстетику. Поэтому в обозримом будущем bredent medical останется моим предпочтительным брендом».



Д-р Рита Сингх (Rita Singh)
Катманду, Непал

- Д-р Рита Сингх -

SKY

Соединение имплантат-абатмент

Преимущества соединения типа Torx®

- Стабильное соединение с опорой на плечо обеспечивает пассивную посадку при любых видах протезирования
→ исключает вертикальные погрешности



- Титан сорта 4 KV (стандарт bredent): → коммерчески чистый титан с пределом прочности на растяжение не менее 800 МПа

→ Удлиненное соединение типа Torx® гарантирует долгосрочную стабильную фиксацию абатмента в имплантате

Torx


→ золотой стандарт для установки с высоким моментом затяжки



→ Отсутствие повреждений имплантата и заклинивания инструментов для установки

SKY

Моноплатформа

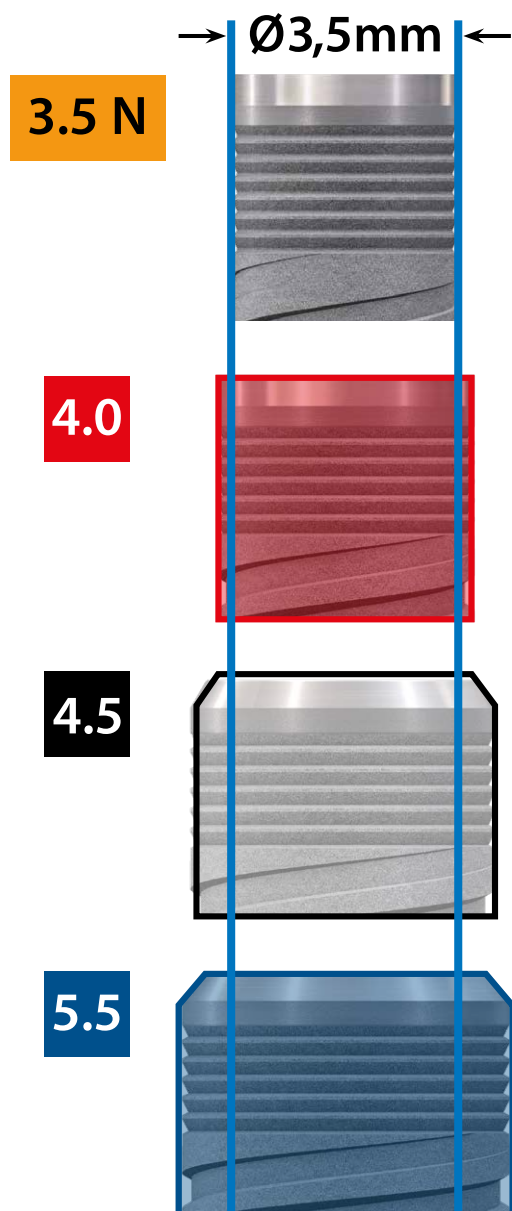

Одно соединение для всех диаметров

Любой абатмент подходит ко всем
4 диаметрам имплантатов:

- narrowSKY:
Абатменты имеют тот же диаметр,
что и имплантаты
- Абатменты blueSKY / SKY classic 4.0
со сменой платформы
- Абатменты blueSKY / SKY classic 4.5 и 5.5
со сменой платформы и обратным
конусом (Backtaper)

SKY

Характеристики

Линия SKY esthetic

- окончательный абатмент


① вогнуто-выпуклый

легко поддается индивидуализации


③ Смена платформы

(за исключением narrowSKY)


На уровне мягких тканей (Tissue Level)

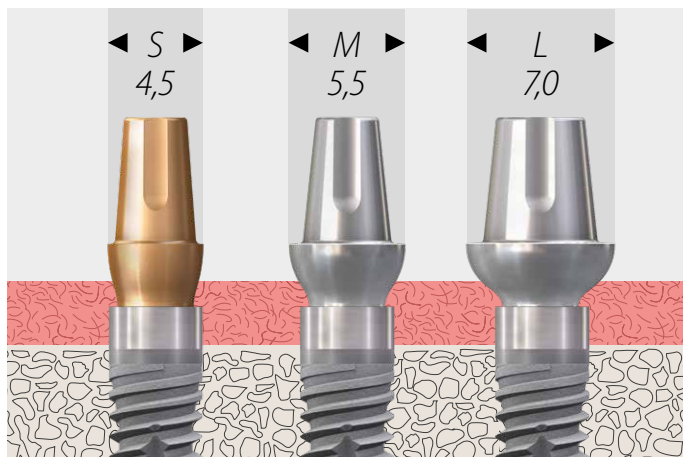

SKY classic с линейкой SKY esthetic

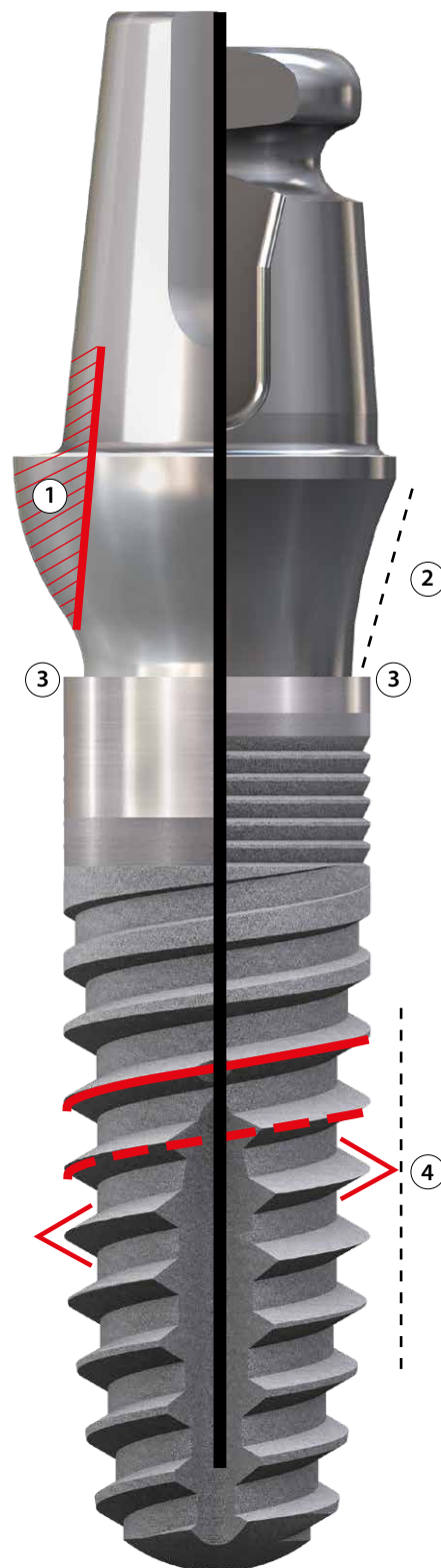


На уровне кости (Bone Level)

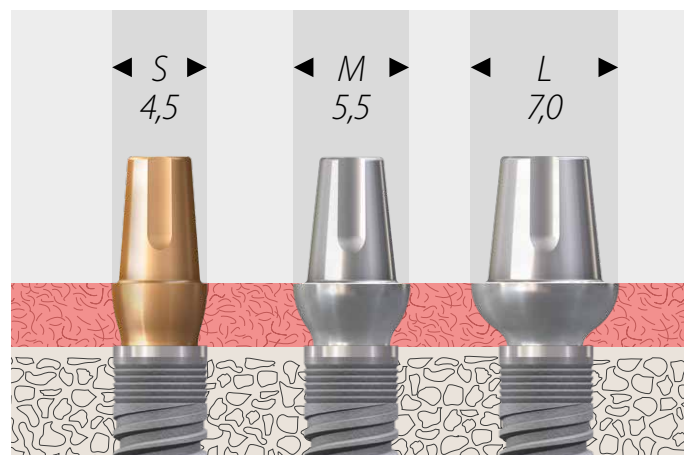

narrowSKY / blueSKY с линейкой SKY esthetic

2 Талированная форма у десневой борозды

много места для мягких тканей

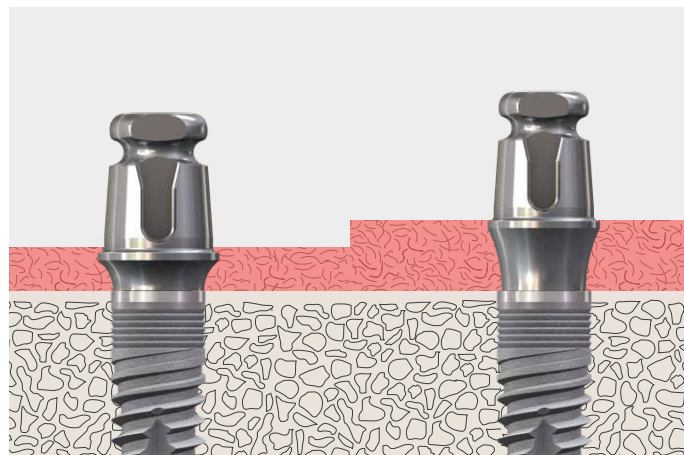


narrowSKY / blueSKY с системой SKY exso

4 Высокая первичная стабильность:

- цилиндрическая и коническая форма
- Самонарезающая двойная резьба
- Компрессионная резьба
- Хирургический протокол, ориентированный на состояние кости


субкрестально

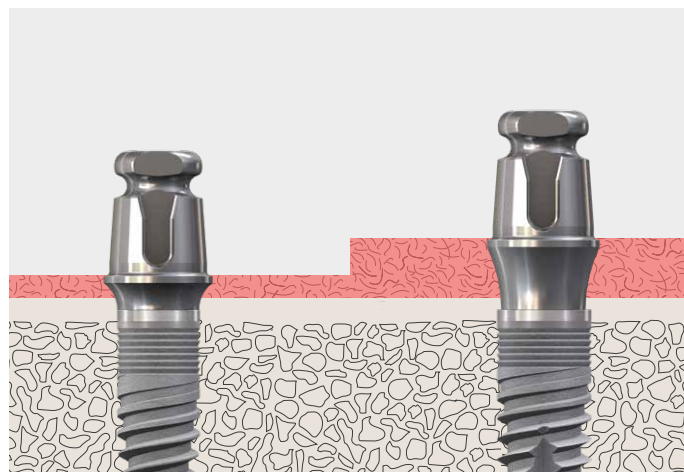

narrowSKY / blueSKY с системой SKY exso


SKY

линейка *esthetic*

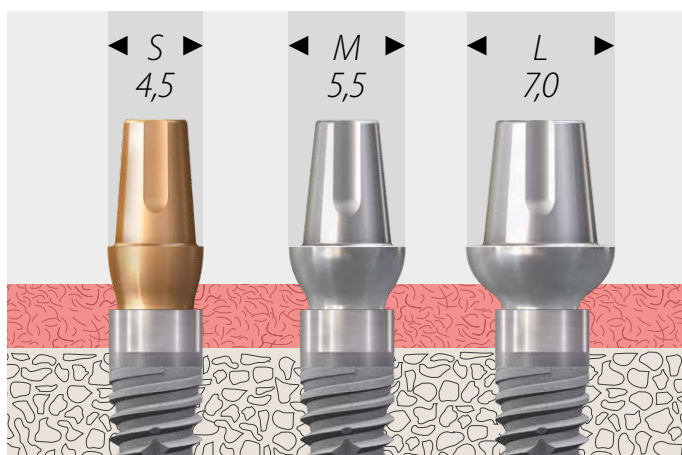

Линейка SKY esthetic:

- Три диаметра плеча абатмента
 - S: 4,5 мм
 - M: 5,5 мм
 - L: 7,0 мм
- Платформа narrow
 - Подходит для narrowSKY
 - Смена платформы у blueSKY и SKY classic
- Вогнутая и выпуклая форма абатмента в придесневой зоне обеспечивает оптимальное прилегание мягких тканей
- Индивидуально настраиваемая компенсация угла наклона оси до 20°
- Единый профиль выступания для формирователей десны, оттисковых и обычных абатментов


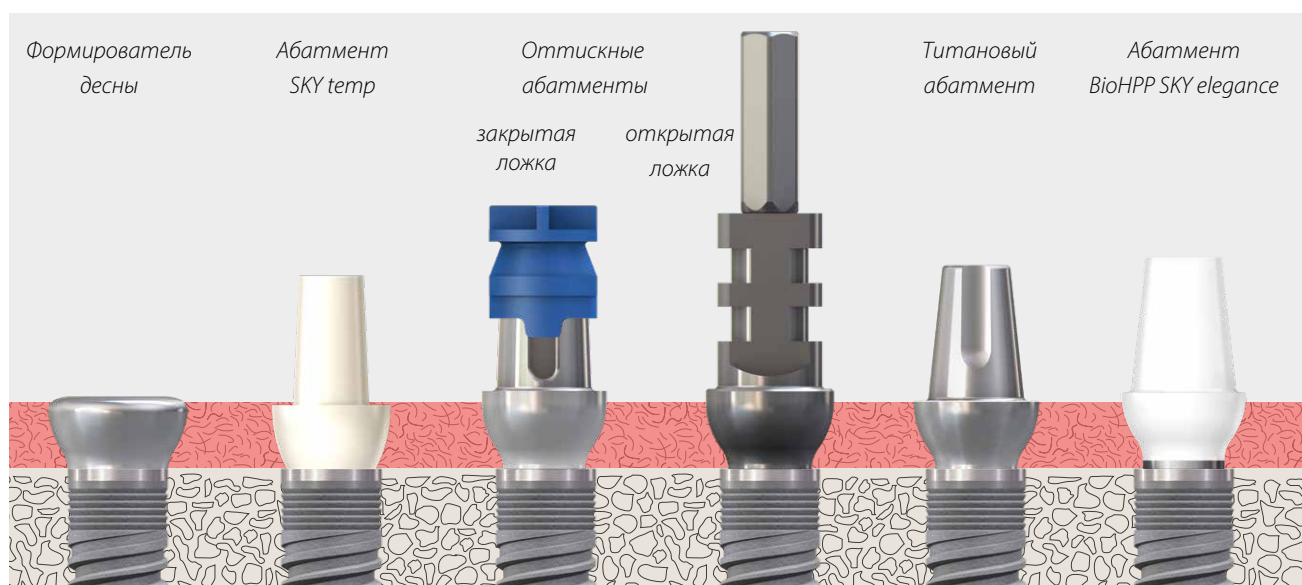


SKY

Многофункциональный абатмент exso

Абатмент SKY exso обеспечивает эффективные и экономичные процессы цементного протезирования и позволяет проводить единовременную терапию без замены абатмента.

- Коронки и мостовидные протезы на цементной фиксации устанавливаются на абатменты SKY exso просто, быстро и эстетично. Данный метод экономически очень выгоден, поскольку оттисковой абатмент соответствует окончательному абатменту.
- Простота снятия слепка с ангулированных имплантатов на уровне имплантата благодаря компенсации наклона до 35°.
- Применение слепочного колпачка SKY для закрытой ложки (REF SKYnPAKA).
- Подходящие лабораторные аналоги упрощают изготовление точных временных и постоянных конструкций.

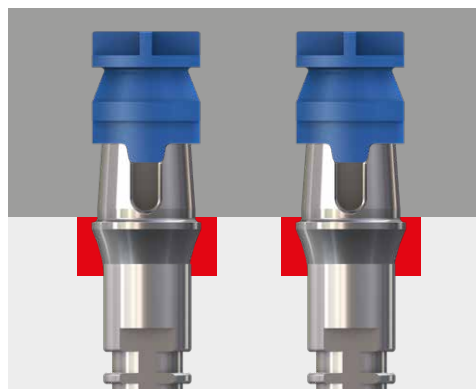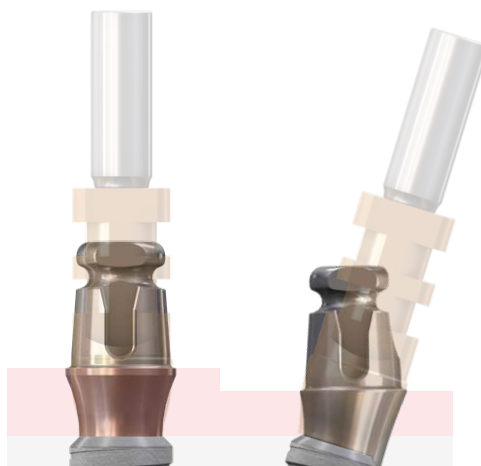

SKY

Абатменты elegance

Абатменты BioHPP SKY elegance

Гибридный абатмент BioHPP SKY elegance предназначен для одноэтапной терапии и немедленного протезирования:


- Мягкий корпус абатмента из BioHPP защищает имплантат от перегрузки.
- Титановый винтовой фиксатор делает его окончательным абатментом.

Замена абатмента не требуется, что позволяет избежать повреждения наложенных мягких тканей.



Гистологический анализ абатментов SKY elegance из BioHPP. Детальный снимок нарастания соединительной ткани через 8 недель.

Проф. Хосе Эдуардо Мате Санчес де Валь (JE Maté Sánchez de Val). Мурсия, Испания, Постер, встреча ЕАО в 2016 году, Париж

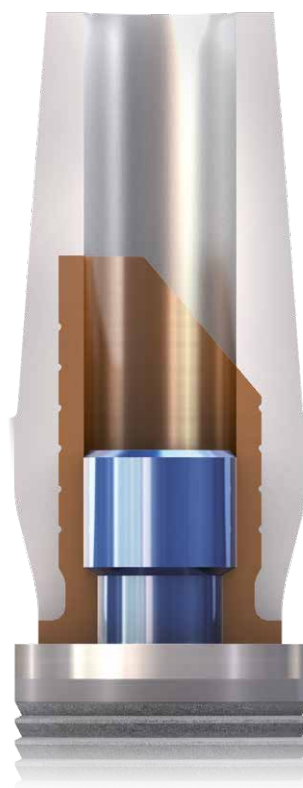

При этом вам доступны все технологии:

- Предварительно изготовленные абатменты с возможностью индивидуальной адаптации.
- Индивидуальные абатменты, изготовленные вручную методом for2press
- Изготовление CAD/CAM из заготовок SKY elegance BioHPP


Абатменты BioHPP SKY elegance успешно применяются в клинической практике с 2012 года. Опубликованные результаты 5-летних наблюдений демонстрируют превосходную стабильность кости и мягких тканей.

CAD/CAM-протезирование

Наши компоненты для протезирования SKY интегрируются в цифровую среду и обеспечивают полный рабочий процесс для всех открытых лабораторных систем CAD/CAM.

Для обработки данных CAD/CAM мы предлагаем:


- Скан-абатменты из PEEK;
- Лабораторный аналог на винтах для печатных моделей;
- Готовые конструкции из BioHPP с оригинальной геометрией соединения bredent medical;
- Готовые титановые конструкции с оригинальной геометрией соединения bredent medical.

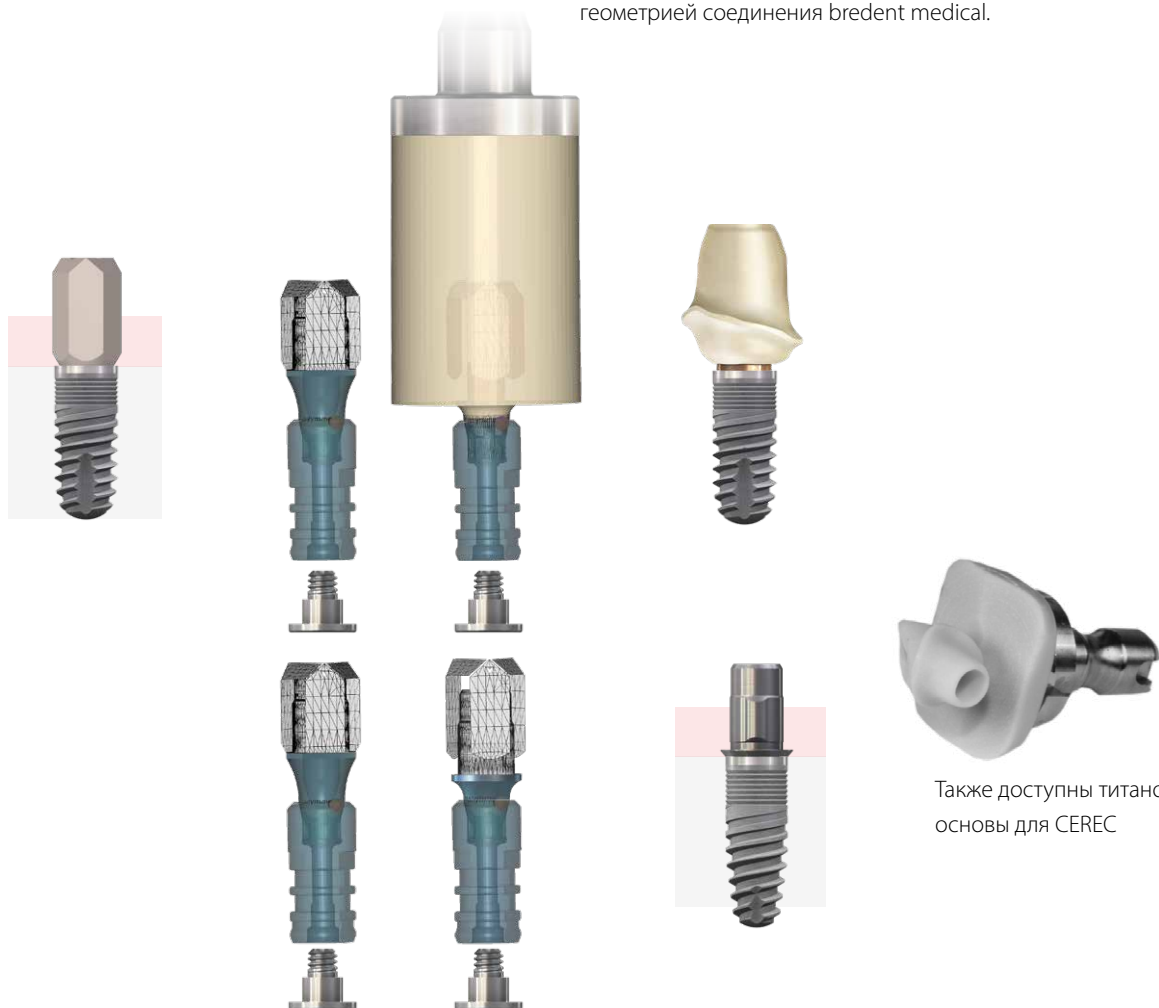

Также доступны титановые
основы для CEREC

SKY

Абатменты SKY fast and fixed / uni.cone

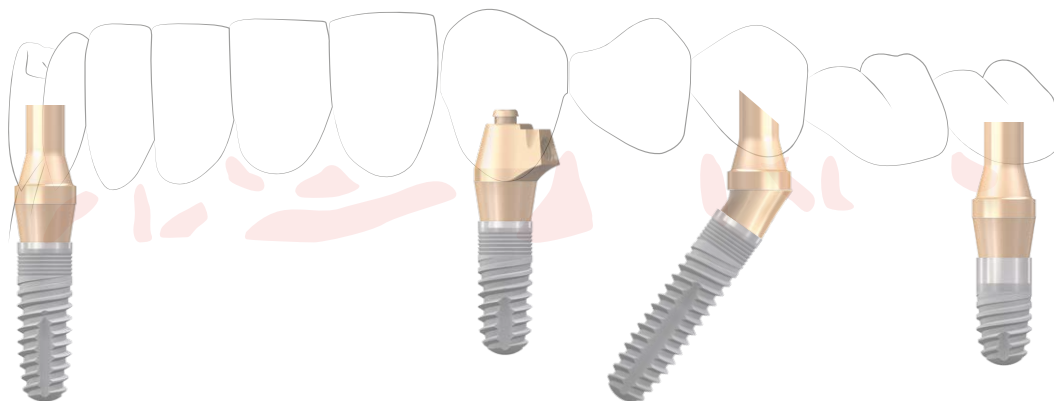

SKY fast & fixed

с 2007 г. зарекомендовали себя как стандарт при полнодуговом протезировании. Благодаря непрерывному развитию при участии наших пользователей и интеграции линеек для традиционного и цифрового протезирования, немедленное протезирование на 4–6 имплантатах стало простым и удобным. Стандартизированные протоколы легко внедрить в любую практику, и уже через несколько часов пациенты с улыбкой покидают врачебный кабинет.



Развитие производственных технологий позволило создавать более узкие и изящные абатменты, которые предотвращают контакт с костью и обеспечивают мягким тканям оптимальные условия для нарастания.




Высокий конус

- стабильное соединение
- защищает протезный винт


Технология Freeform

- Узкие абатменты и смена платформы — отсутствие контакта с костью
- Отсутствие острых углов и краев для хорошего нарастания мягких тканей

Боковые усилия передаются протезом
непосредственно на абатмент —
протезный винт защищен от перегрузок

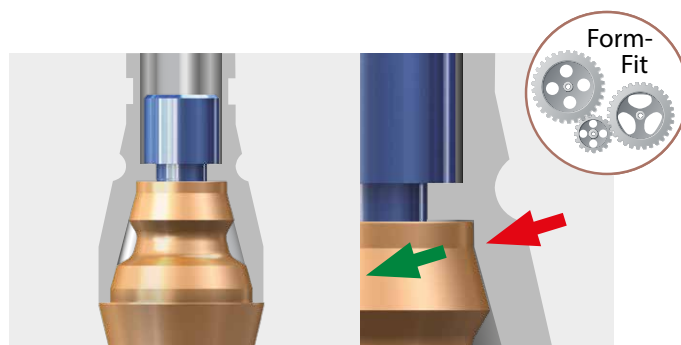

Трансверсальный винт обеспечивает
эстетические преимущества и всегда
остается внутри мостовидного протеза

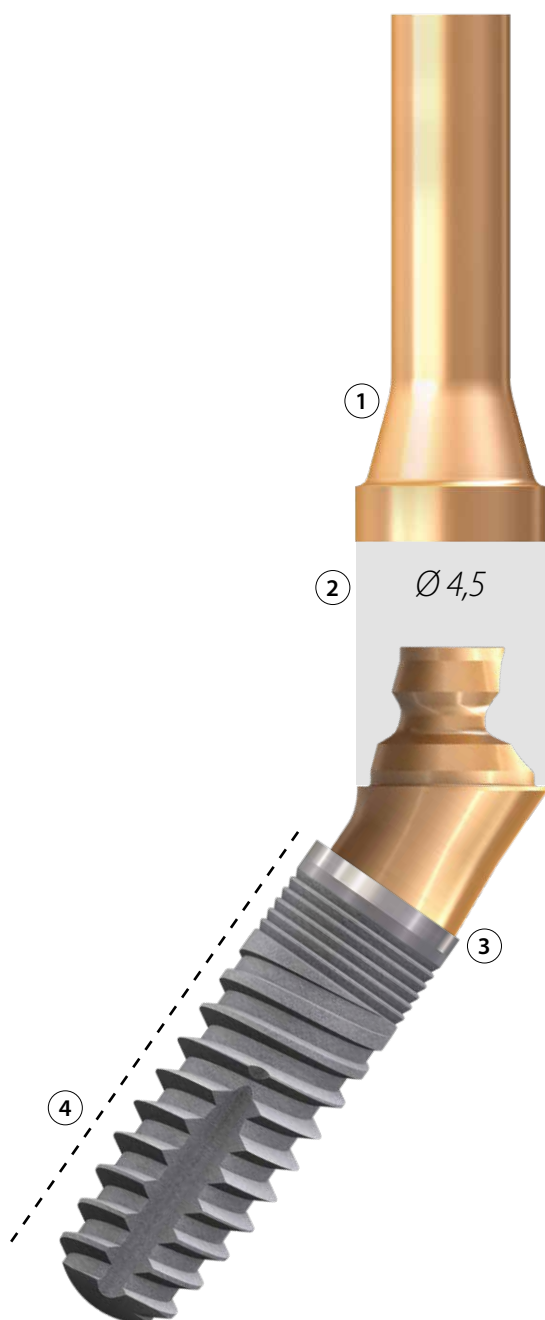

- ① Оклюзионная и уникальная
трансверсальная винтовая фиксация
- ② 2 платформы
- ③ Смена платформы
- ④ Высокая первичная стабильность
при любом качестве кости
- ⑤ Долгосрочно стабильный
уровень костной ткани


SKY


Съемные протезы

Docklocs®

Стандарт фиксации протезов с использованием усовершенствованных матриц.

- Прямые абатменты в 5 вариантах высоты
- Ангулированные абатменты под углом 18° в 3 вариантах высоты
- Различные ретенционные элементы из высокопрочного полимера

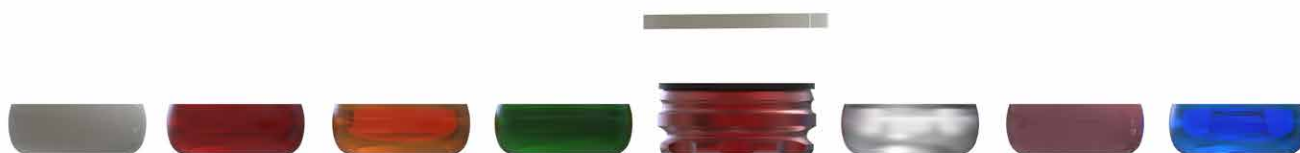

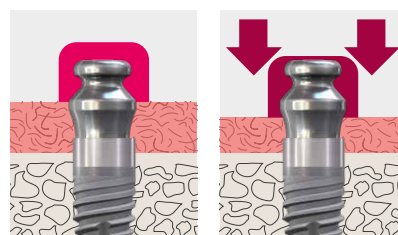

Благодаря эластичной фиксации

- высокая стабильность
и максимальный комфорт


TiSi.snap

fixed and yet removable

Абатменты TiSi.snap с большими ретенционными поверхностями и специальным эластичным силиконовым покрытием retention.sil задают новые стандарты в области надежной и долговременной фиксации протезов. Уникальная эластичность обеспечивает пациенту естественные ощущения при жевании.

Узкие имплантаты спереди и короткие трансгингивальные имплантаты в глубоких дистальных участках поддерживают стабильность протеза благодаря широкой области опоры.

Отсутствие чрезмерного давления на заднюю кость способствует сохранению костной ткани.

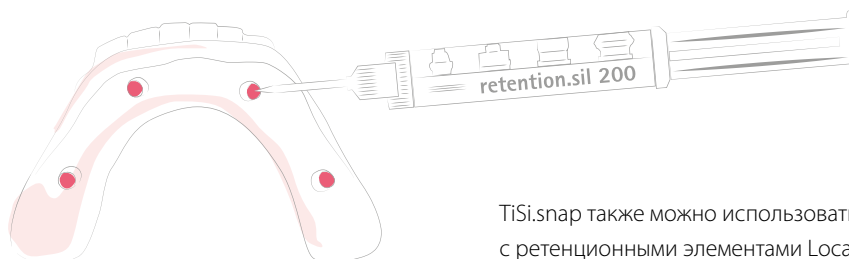

TiSi.snap также можно использовать с ретенционными элементами Locator®.

О нас

bredent group — это международный семейный бизнес, который с 1974 года предлагает инновационные комплексные решения для стоматологического протезирования пациентов. Благодаря многолетнему опыту и инновационному потенциалу наша компания стала надежным выбором для клиентов и образцом для подражания на стоматологическом рынке. В состав группы компаний входят бренды *bredent*, *bredent medical*, *Dental Concept Systems* и *HELBO*. Их синергия идеально выверена и позволяет создавать комплексные системные решения в области протезирования на имплантатах. Методики лечения разработаны в соответствии с немецкими стандартами качества. В двух словах:

We are one!

Что нас отличает

bredent group выстраивает корпоративную культуру на основе четких ценностей, которые служат фундаментом для взаимодействия между сотрудниками, клиентами и деловыми партнерами ради долгосрочных отношений и инновационного сотрудничества.



Ориентация на пациента

Принцип We are one (Мы единое целое) в полной мере распространяется и на пациентов. В ДНК bredent group заложена забота о пациенте. Их благополучие, ожидания и удовлетворенность результатом — наш главный приоритет. Именно поэтому для нас принципиально важно, чтобы продукция соответствовала немецким стандартам качества и постоянно совершенствовалась.

Новаторство

Опираясь на потребности наших клиентов, инновационные команды в структуре bredent group совместно работают над созданием перспективных и целевых решений, приносящих реальную пользу пациентам.


Эффективность

Мы уверены в своем потенциале и корпоративной философии, которые позволяют нам создавать новые вехи в стоматологии. Мы сосредоточены на развитии и воплощении в жизнь стандартов качества «Made in Germany» в поиске лучших решений.

Партнерство


В тесном сотрудничестве с нашими клиентами мы разрабатываем инновационные решения для обеспечения максимально качественного протезирования и реставрации пациентов. Наша ежедневная цель — оказывать всестороннюю поддержку клиентам и деловым партнерам.

Наша доступность и поддержка — гарантия надежного выбора. Честные и доверительные отношения друг с другом — наш главный приоритет.

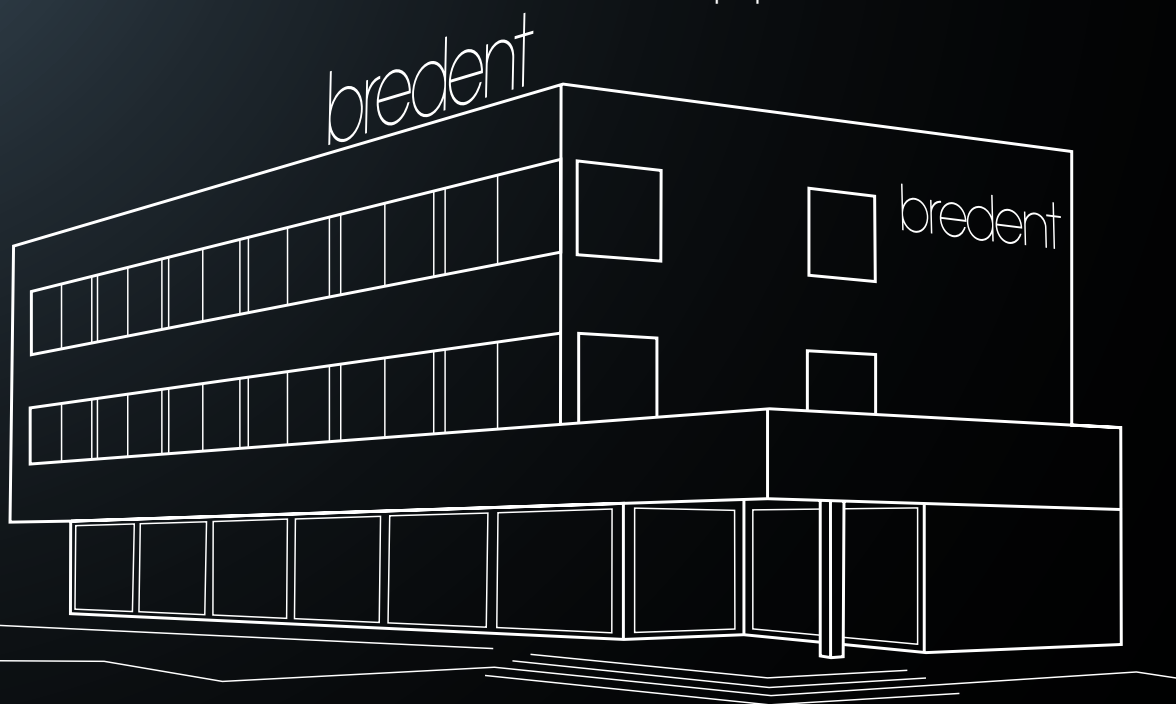

SKY[®]

IMPLANT SYSTEM

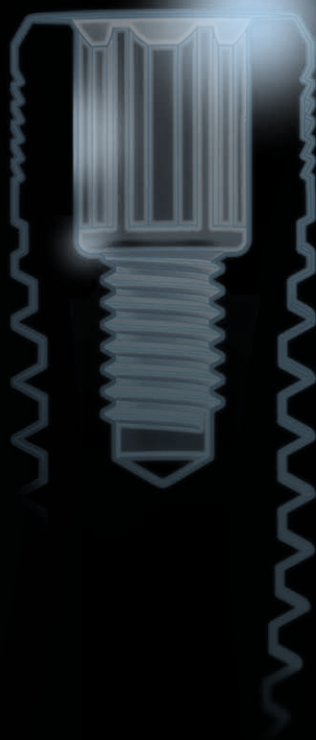

Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений

009991RU-20251106



bredent
medical

bredent^{group}

Обращайтесь, пожалуйста, в соответствующий филиал bredent group или к нашим дистрибьюторам в вашем регионе.
bredent medical GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · T.: +49 7309 872-443 · info-medical@bredent.com · www.bredent-medical.com