

SKY classic 3.5

narrow platform



L'IMPLANT PLUS FIN
FIABLE, COMME TOUJOURS.



Petits espaces. Grandes possibilités.

*L'implant idéal pour les situations
où l'espace est limité.*

Le SKY classic 3.5 narrow platform offre l'espace nécessaire pour des résultats biologiquement stables et esthétiques, même en cas de des situations exigeantes.

SKY
classic

*MOINS DE TITANE,
PLUS DE TISSUS MOUS.*

- Un espace plus grand par rapport à la dent voisine
- Plus d'espace entre deux implants
- Grande stabilité
- Les implants et les piliers ont le même diamètre

« Plus d'espace »

*pour des conditions optimales, des papilles
stables et un succès à long terme*

regular



narrow



Tissue Level repensé.


LA STABILITÉ COMMENCE

DANS LES TISSUS MOUS.

Le design Tissue-Level déplace la connexion implant-pilier de la zone osseuse vers les tissus mous, réduisant ainsi les micromouvements critiques dans la zone crestale.

- Intégration optimale des tissus mous
- Préservation de la structure osseuse crestale
- Réduction du risque de péri-implantite
- Résultats stables à long terme

osseo-connect-surface (ocs)[®]

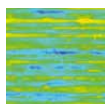


Surface usinée de 1,5 mm

→ qui favorise la fixation du tissu conjonctif




Surface mordancée de 0,5 mm

→ qui offre des possibilités d'adaptation aux os et aux tissus mous

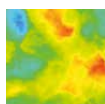

Surface sablée et mordancée

→ qui favorise la fixation des ostéoblastes pour une ostéointégration rapide

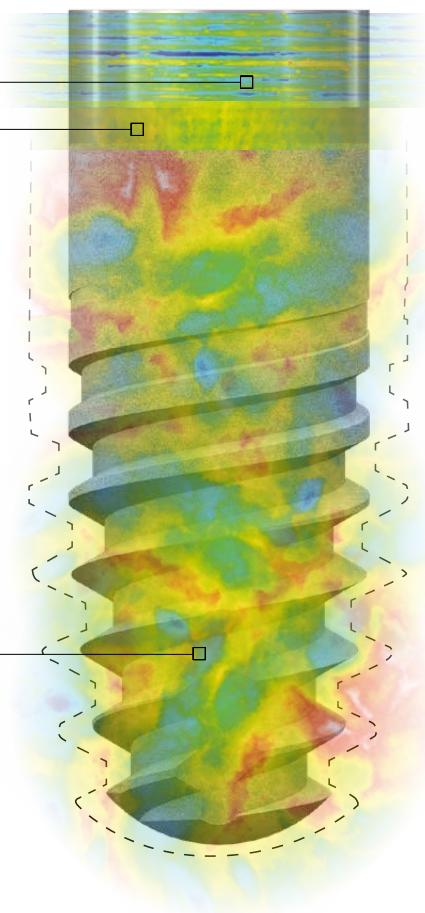

SKY 
classic

L'implant idéal dans plus de 60 % des positions.

Le **SKY classic narrow platform** est idéal pour les positions d'implant marquées de des symboles orange.


SKY classic narrow platform 

SKY classic regular platform 

POUR UNE ESTHÉTIQUE OPTIMALE AVEC STABILITÉ PAPILLAIRE ET OSSEUSE.

Le SKY classic narrow platform crée l'espace nécessaire sur le plan biologique – pour des résultats esthétiques avec préservation des papilles et une stabilité osseuse à long terme.

- Espace suffisant par rapport à la dent voisine (**min. 1,5 mm**)
- Espace suffisant entre les implants
- Espace suffisant **pour des papilles et des os stables**

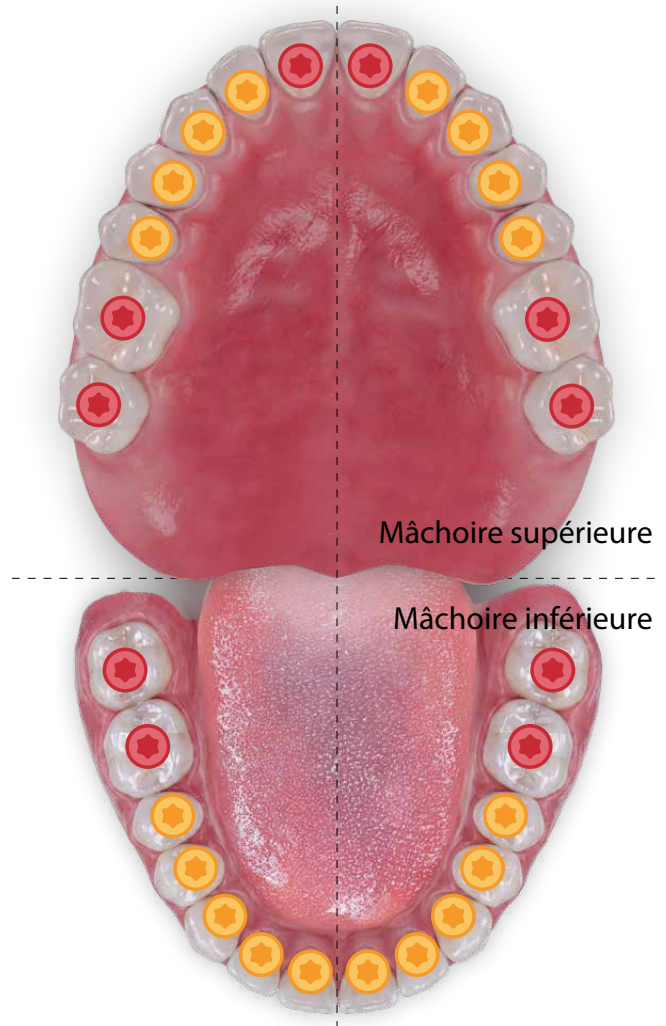

Grande flexibilité dans le positionnement de l'implant.


POUR LES **SITUATIONS**
ANATOMIQUES **COMPLEXES**.

SKY 
classic

narrow
platform

Le SKY classic 3.5 narrow platform est positionné 1 à 2 mm sous la gencive et offre des conditions optimales pour une intégration stable des tissus mous. En effet, la connexion supracrestale entre l'implant et le pilier empêche les micro-mouvements dans l'os crestal, ce qui garantit à long terme une stabilité des tissus durs et mous.

Grâce à sa grande flexibilité, le système est particulièrement adapté aux situations anatomiques complexes telles que les crêtes osseuses en pente ou les gencives fines. Sa surface respectueuse des tissus mous contribue en outre à réduire le risque de péri-implantite.

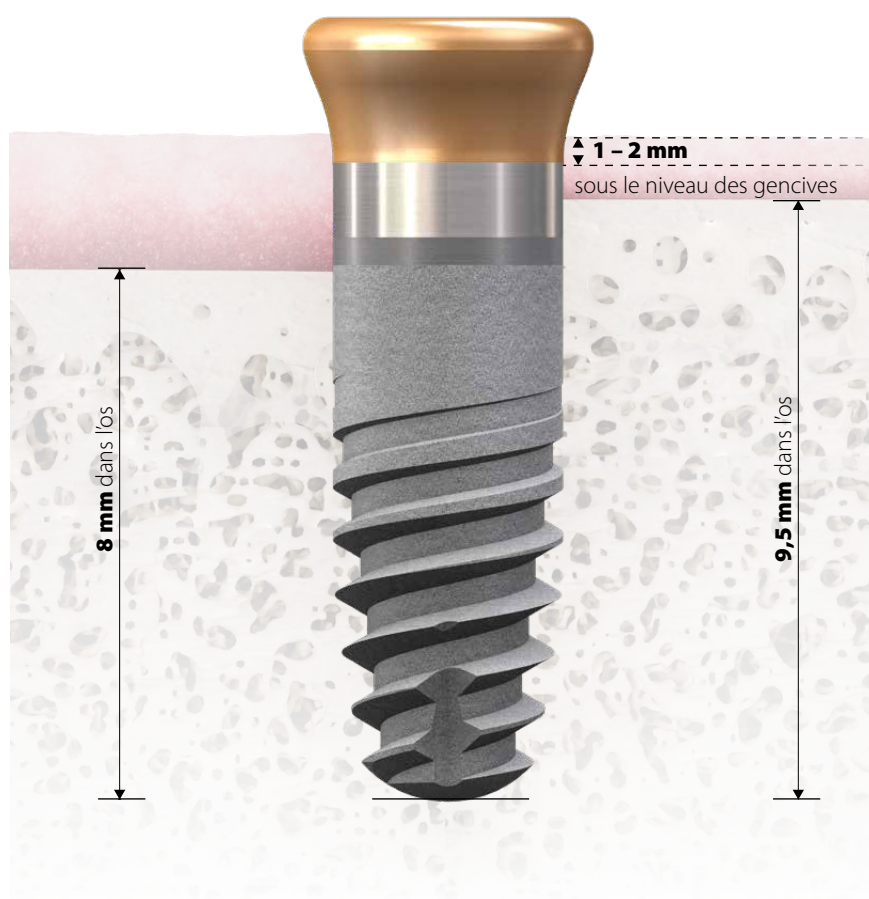

Variabilité

→ 1 à 2 mm sous le niveau des gencives et entre 8,0 et 9,5 mm dans l'os avec un SKY classic 3.5 narrow platform de 10 mm de longueur.

Moins de forces de levier. Sécurité renforcée.

GRANDE STABILITÉ MÉCANIQUE

GRÂCE À UNE HAUTEUR DE COURONNE RÉDUITE.

Les implants supracrestaux réduisent la hauteur de la couronne de 2 à 3 mm par rapport aux implants sous-crêtaux. Les couronnes plus courtes réduisent la charge d'environ 10 % par millimètre.

- Meilleure stabilité des vis et ancrage amélioré
- Résistance fiable à long terme de la superstructure
- Meilleure stabilité mécanique et durée de vie prolongée



SKY 
classic

*Les couronnes plus longues
de 3 mm augmentent la charge
verticale d'environ 30 %.*

Flux de travail des correspondants pour le **SKY classic**

1


Le chirurgien place l'implant dans sa position prévue et scanne la position pendant l'intervention chirurgicale.

Une cicatrisation à ciel ouvert avec des vis de cicatrisation évite une intervention chirurgicale supplémentaire et améliore l'esthétique.



2

Pendant la phase de cicatrisation, le pilier de couronne ou la restauration peuvent être réalisés en toute tranquillité.

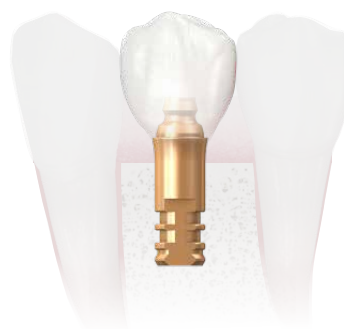

3

Dès son arrivée, le patient est pris en charge immédiatement – un traitement plus rapide rend les patients plus satisfaits.



CHIRURGIEN

CORRESPONDANT

PATIENT

AVANTAGES POUR

le chirurgien

- Une efficacité accrue
- Moins d'interventions
- Plus de patients

le correspondant


- Traitement rapide
- Processus prévisibles
- Résultats esthétiques

le patient

- Moins de rendez-vous
- Moins de contraintes grâce à un nombre moindre d'interventions



Informations de commande

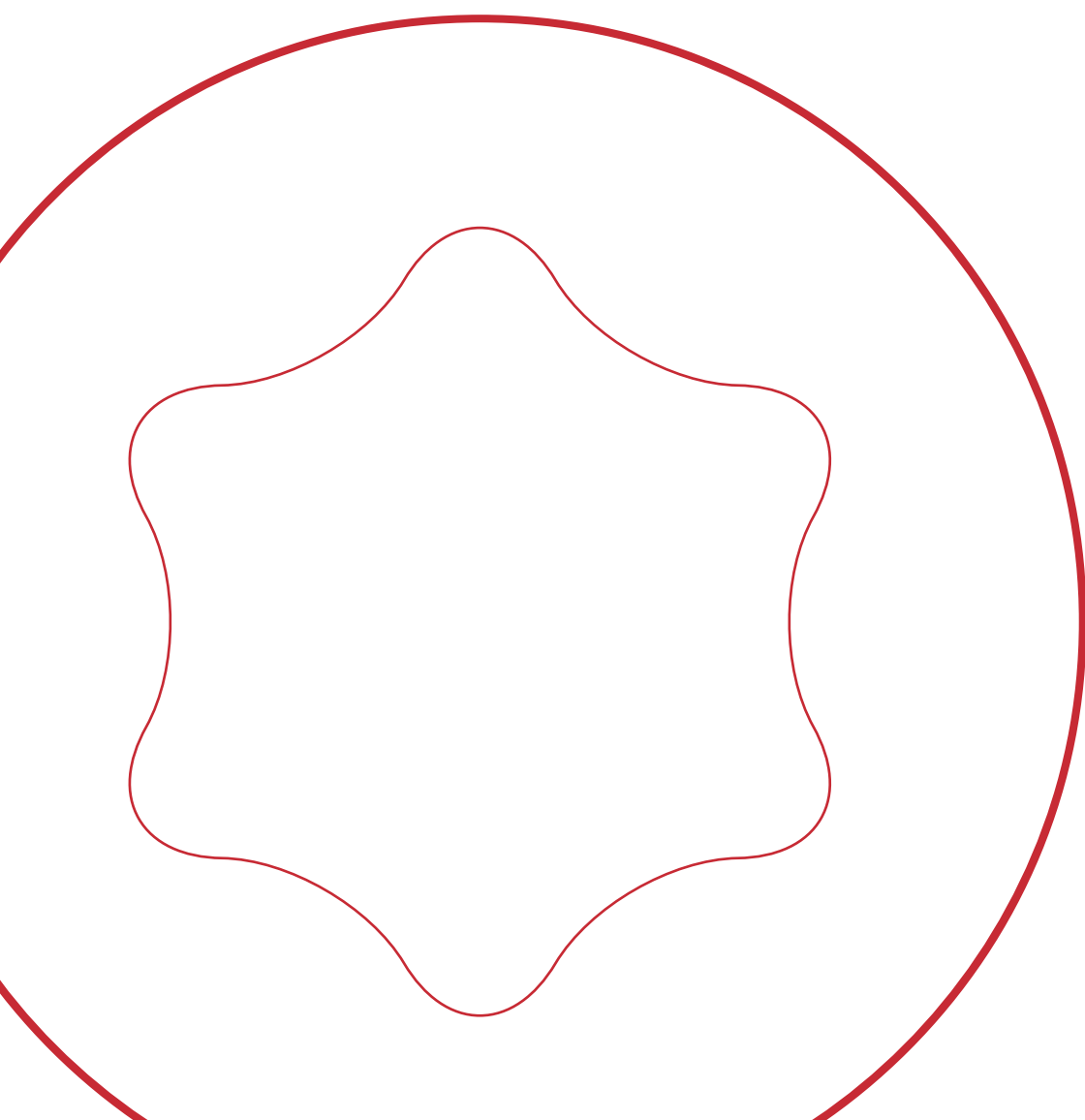

Implants

L 8 mm

L 10 mm

L 12 mm

L 14 mm

L 16 mm

***narrow platform:**
Vis de recouvrement comme pour narrowSKY



kSKY3510



kSKY3512



kSKY3514



kSKY3516

3.5



kSKY4008



kSKY4010



kSKY4012



kSKY4014



kSKY4016

4.0



kSKY4508



kSKY4510



kSKY4512




kSKY4514


4.5

SKY – Prothétique

Accessoires SKY fast & fixed

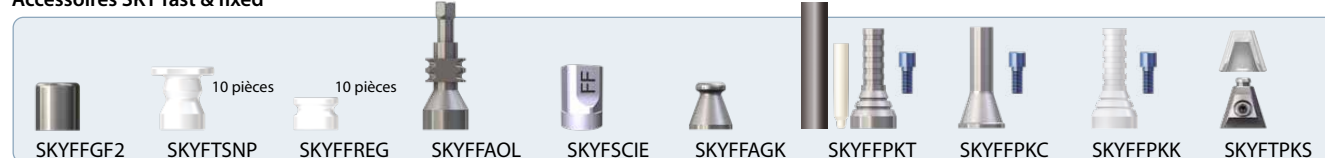


Piliers SKY fast & fixed

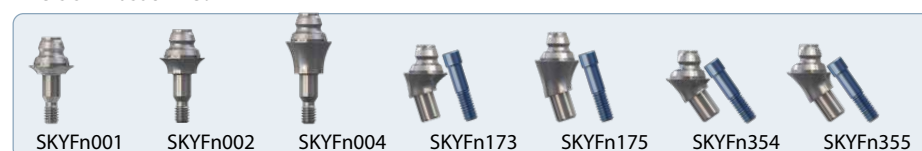


Analogues de laboratoire



Accessoires SKY uni.cone

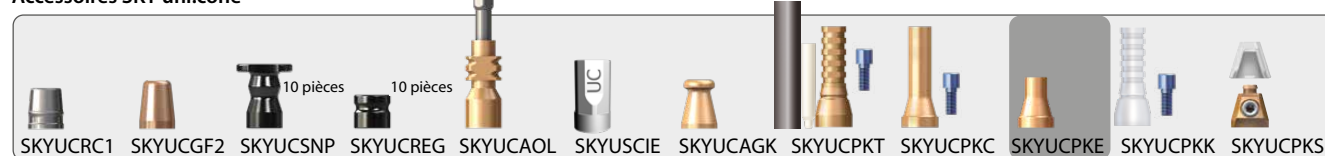


Piliers SKY uni.cone

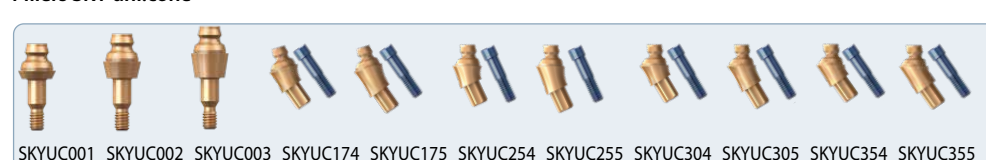

Analogues de laboratoire uni.cone



BioHPP SKY elegance

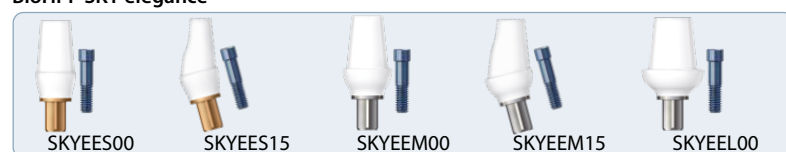

Base en titane



Systèmes CFAO ouverts


SKY scan abutment 11



prefab Titan



Base titane uni.fit

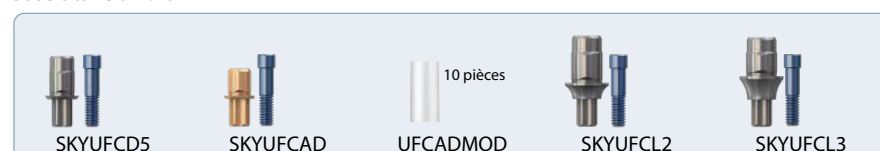


Systèmes fermés

uni.fit Base en titane S pour CEREC®




SKY analogues pour implant

Plâtre

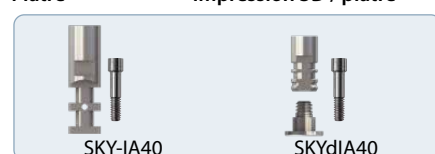


Impression 3D / plâtre

SKY Ti-base flex

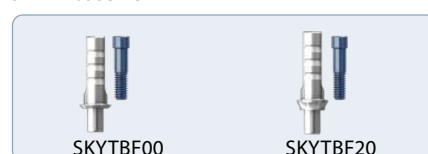

SKY Ti-base flex bridge

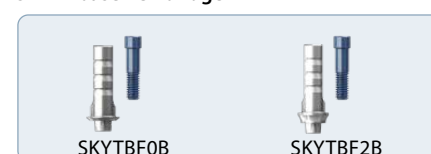

Vis de cicatrisation SKY esthetic



SKY piliers d'empreinte

porte empreinte ouvert

porte empreinte fermé





SKY EXSO



Analogue de laboratoire EXSO Impression 3D Plâtre



SKY esthetic

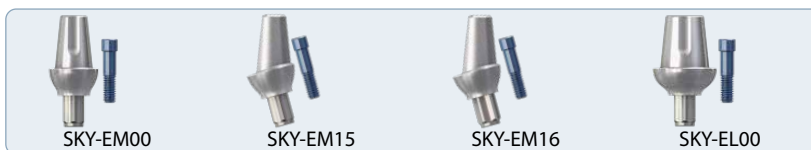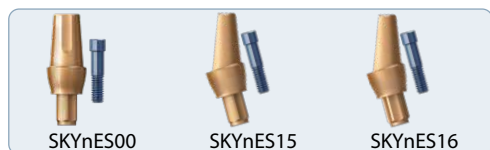

SKY piliers en titane



SKY TiSi.snap



retention.sil



SKY vis clinique



Laboratoire


SKY vis coiffes prothétiques




Docklocs® – Piliers 0°



Docklocs® – Piliers angulés 18°

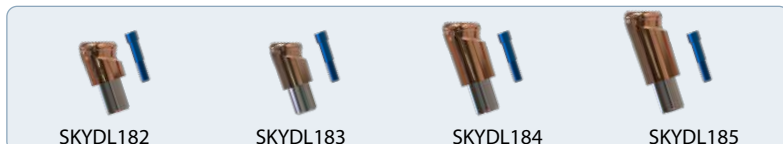

Docklocs® – Kits de rétention (compatibles avec Locator)

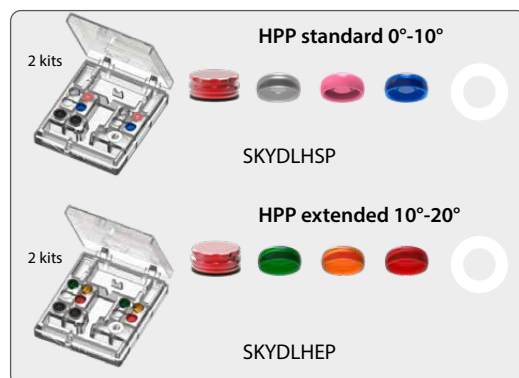



360° DENTAL COMPETENCY



<https://ifu.bredent-group.com/>

Simple téléchargement d'un mode d'emploi à l'aide d'un PC standard ou d'un appareil mobile et du logiciel Adobe Acrobat Reader. Gratuitement sous: <https://get.adobe.com/fr/reader/>. Une version imprimée est disponible auprès du fabricant dans un délai de 7 jours (en cas d'expédition dans la CE).

© bredent medical GmbH & Co. KG, 2026

Tous droits réservés. Les contenus de cette publication, notamment les textes, les images et les graphiques, sont protégés par le droit d'auteur.

Photos : bredent medical GmbH & Co. KG, partenaires ainsi qu'utilisateurs externes.

Les cas présentés ont été mis à disposition par les utilisateurs respectifs.

Sous réserve d'erreurs et de modifications.



00913030F_20260805

bredent
medical

bredent
group